



THE BELMONT[®]

RAPID INFUSER RI-2

ボタンを押すだけで、高速で信頼性が高く、気泡ゼロかつ100%アルミニウム不含の加温血液・輸液を行うことで救命に寄与します。

命を救う。共に。





軍の現場で



手術室で



陣痛・分娩
および小児科



救急救命ケア


「ザベルモント」で 確かな自信

20年以上にわたり極めて過酷な現場で使用されてきたThe Belmont®ラピッドインフューザーは、輸血の合併症を軽減するように設計された高流量性能と包括的な安全機能を備えた**100%アルミニウム不含の輸液送達を行う唯一の高速輸液装置***として世界中の臨床医から信頼されています。最悪の事態に備えて最良の装置を準備しておくことで、安心が得られます。

気泡ゼロ。高い信頼性。高速。



- 1 弁/再循環ライン
- 2 流入空気検出器
- 3 高速ペリスタルティックポンプ
- 4 流入温度プローブ
- 5 熱交換器
- 6 流出温度プローブ
- 7 タッチスクリーン画面
- 8 圧センサー/気泡除去機能
- 9 流出空気検出器
- 10 注入/再循環弁

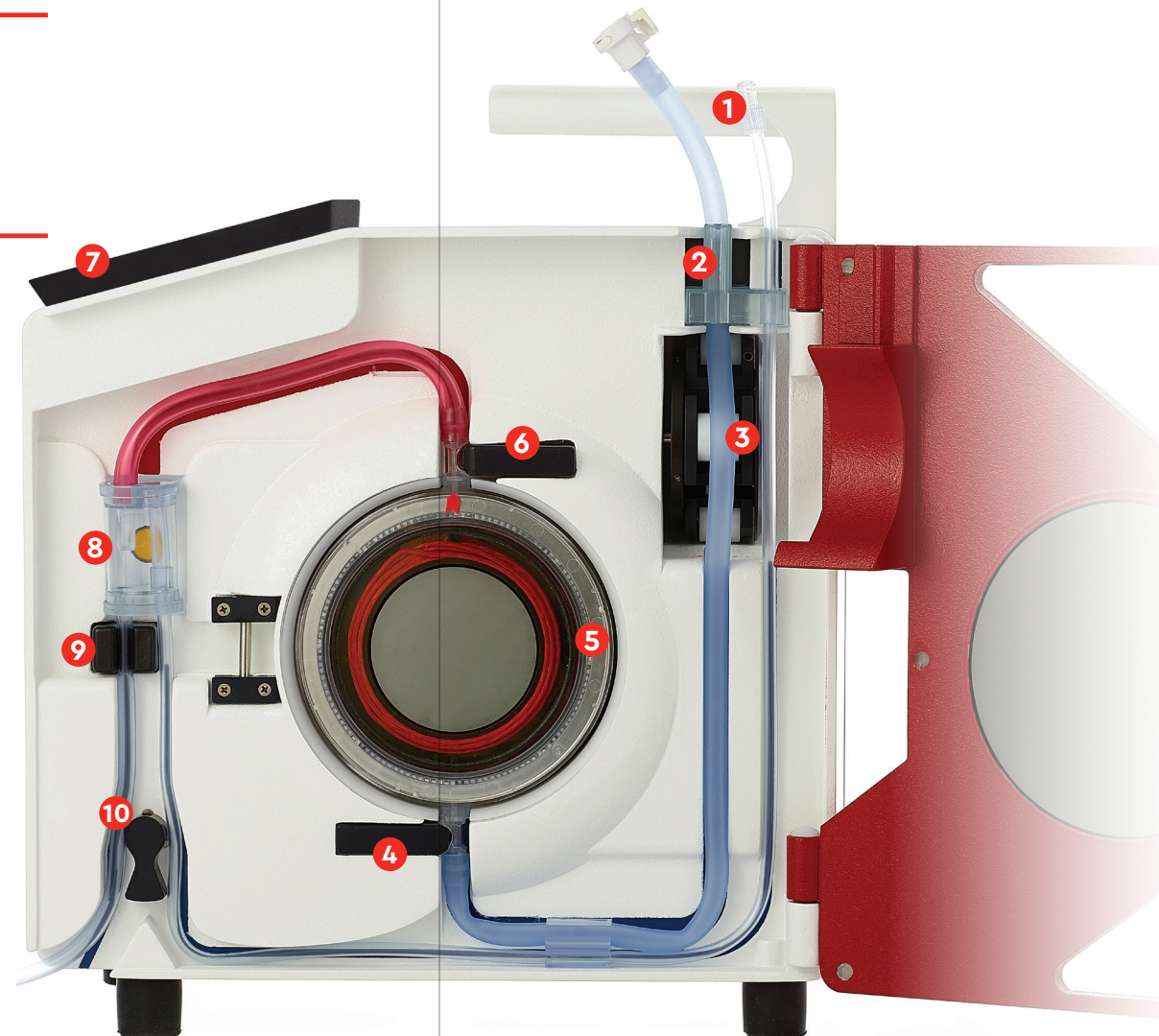

100%アルミニウム不含の単回使用品

医用グレードのステンレス鋼製熱交換器により、アルミニウムへの曝露リスクがありません。

自動空気検出機能および除去

2つの超音波空気検出器と患者安全弁が空気による塞栓を防ぎます。

自動プライミング

1分未満で完全にプライミングを行い、患者を切断せずに再プライミングが簡単に行えます。

高速ペリスタルティックポンプ

輸液送達を正確に制御して行います。
流量範囲:2.5~1000 ml/分。

電磁誘導加熱

乾式の誘導加熱テクノロジーと2つの赤外線温度センサーにより、数秒以内で安定した正常体温の輸液を提供します。

高度な圧調整

自動で圧力をモニタリングし、圧力が300mmHgを超える場合に流量調整を行います。

直感的なタッチスクリーン画面

高コントラスト画面により、表示される指示に従いやすく、アラームや警告が明確に示され、装置の操作をすばやく行えます。

リアルタイムで表示:

- 設定流量
- 実際の流量
- 注入総量
- チューブ圧



注文情報

ラピッドインフューザー RI-2、1000 ml/分

点滴速度: 2.5-1000 ml/分

- 米国: 品番#903-00037 (120V)
- 米国外: 品番#903-00037A (230V)

ラピッドインフューザー RI-2、750 ml/分

点滴速度: 2.5-750 ml/分

- 米国: 品番#903-00039 (120V)
- 米国外: 品番#903-00039A (230V)
- NSN: 6515-01-661-8500 (120V)

3スパイク付きディスプレイザブルセット

品番 #903-00006 (12 セット/ケース)

品番#903-00106 (6 セット/ケース)

3.0リットルリザーバー(LVR)

品番#903-00018

4X4リットルリザーバー&熱交換器セット


品番#903-00032

患者ライン(エクステンション)

品番#903-00022

患者ライン(デュアル)

品番#903-00004

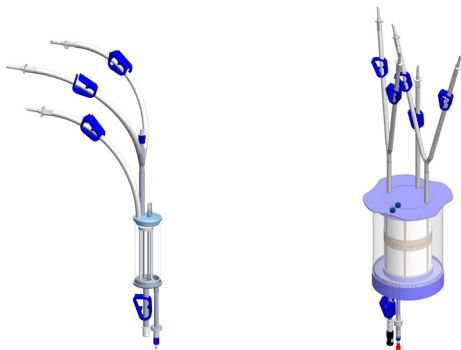

標準

120 ml リザーバー
(3スパイク)

オプション

3.0 リットルリザーバー
(5スパイク)

すべての単回使用品はアルミニウムを100%不含

ハードウェア仕様

寸法

13.5インチ x 7.5インチ x 12インチ
342.9 mm x 190.5 mm x 304.8 mm

重量

28ポンド
12.7 kg.

可搬性

点滴ポールへすばやく取り付け可能/ユニット上部にハンドル付き

電源

115 ボルト、または220/240ボルトAC入力

バッテリー

内蔵型充電式で持ち運び可能、加熱せずに全機能の動作を行う

輸液ポンプ

ローラー式のペリスタルティックポンプ
流速 2.5~1000 ml/分

ヒーター

最大印加電力1440ワット

装着部タイプ

CF形

耐除細動

センサー

空気検出器×2、圧トラスデューサー、温度プローブ(赤外線検出)×2、ポンプ流入速度センサー、開扉検出器、弁有効化センサー

コンピューターの制御

内蔵の全機能制御

コンピューター故障が発生した場合、ハードウェアの繰返し上書き保護

表示

液晶の防水タッチパッド

• 外側寸法

5.85 インチ x 4.12 インチ
148.1 mm x 104.7 mm

• 使用部

4.53 インチ x 3.40 インチ
115.1 mm x 86.3 mm

当社製品についての詳細な情報は、担当窓口
(sales@belmontmedtech.com)までお問合せください。



患者
加温



患者
冷却



輸液
管理



780 BOSTON ROAD
BILLERICA, MA 01821, 米国

米国: 866.663.0212
米国以外: +1 978.663.0212
ファックス: 978.663.0214

WWW.BELMONTMEDTECH.COM



Belmont® ラピッドインフューザーRI-2は、適用される基準に従って、感電、火災、機械的危険性について評価を受けています。

Belmont Instrument LLC
ISO 13485 認証登録済み
登録番号: A18173

Belmont Medical Technologies™は Belmont Instrument, LLCの商標です
2022 © Belmont Instrument, LLC | 701-00136-JA Rev A