



# THE BELMONT<sup>®</sup>

---

## RAPID INFUSER RI-2

快速、可靠、无气泡且 100% 不含铝，  
只需按一下按钮，即可输送挽救生命的  
温热血液和液体。

---

**拯救生命。共同携手。**





军用



手术室



分娩和儿科



急诊和重症监护


## “THE BELMONT” 给用户带来信心

经过在最极端的情况下 20 多年的使用，The Belmont® 快速输液器已经赢得全球临床医生的信任，该快速输液器旨在减少输血并发症，是**唯一一款做到 100% 不含铝液体输送、高流量\*且安全功能全面的快速输液器**。以最好的设备，应对最坏的状况，从容不迫。

### 无气泡。可靠。 快速。



- 1 排气/再循环管线
- 2 输入空气探测器
- 3 高速蠕动泵
- 4 输入温度探头
- 5 热交换器
- 6 输出温度探头
- 7 触摸显示屏
- 8 压力传感器/除泡器
- 9 输出空气探测器
- 10 输液/再循环阀

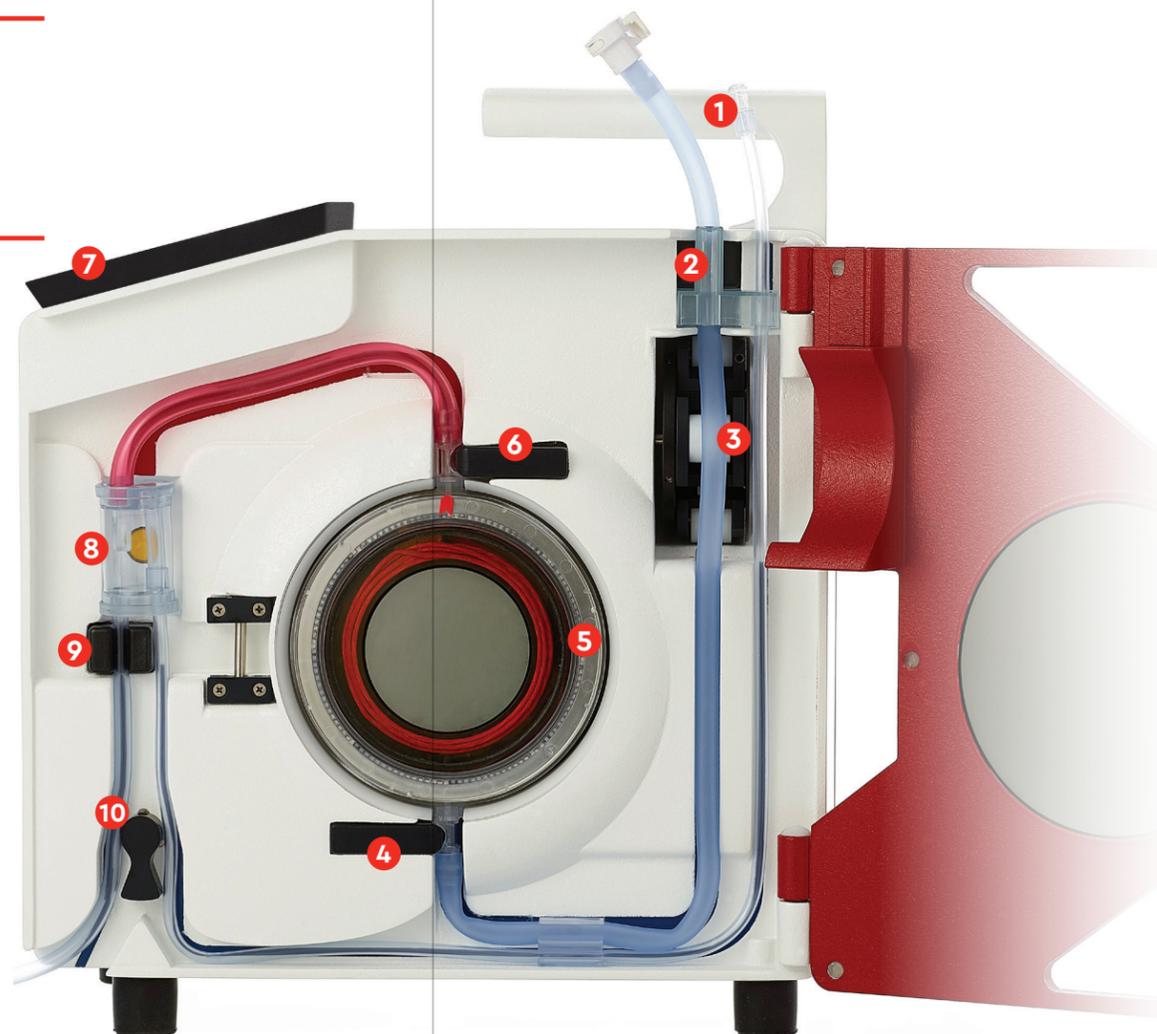

#### 100% 不含铝一次性用品

医疗级不锈钢热交换器消除铝暴露的风险。

#### 自动空气探测和清除

两个超声波空气探测器和患者安全阀防止空气栓塞。

#### 自动预充

在 1 分钟内完全预充，无需断开与患者的连接即可轻松重新预充。

#### 高速蠕动泵

精确控制液体输送，流量范围从 2.5 到 1000 mL/min\*。

#### 电磁感应加热

干式感应加热技术和两个红外温度传感器在几秒钟内即可供应稳定的常温液体。

#### 先进的压力调节功能

当压力超过 300 mmHg 时自动进行压力监测和流量调节。

#### 直观的触摸显示屏

高对比度显示屏提供简单易懂的屏幕说明，给出描述清晰的警报和警示，让您能够快速完成设备操作。

实时显示：

- 设定流量
- 实际流量
- 总输流量
- 管线压力



## 订购信息

### 快速输液器 RI-2, 1000 mL/min

输液流量: 2.5-1000 mL/min

- 美国: 部件号 903-00037 (120 V)
- 国际: 部件号 903-00037A (230 V)

### 快速输液器 RI-2, 750 mL/min

输液流量: 2.5-750 mL/min

- 美国: 部件号 903-00039 (120 V)
- 国际: 部件号 903-00039A (230 V)
- NSN: 6515-01-661-8500 (120 V)

### 3 穿刺器一次性管组

部件号 903-00006 (12 套/箱)

部件号 903-00106 (6 套/箱)

### 3.0 升储液桶 (LVR)

部件号 903-00018

### 4X4 LVR 和热交换器套装


部件号 903-00032

### 患者管线延长线

部件号 903-00022

### 双患者管线

部件号 903-00004

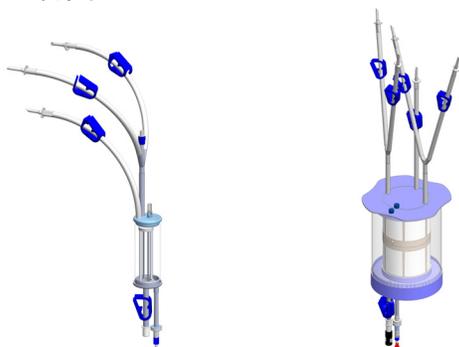

#### 标准

120 mL 储液桶 (3 穿刺器)

#### 可选

3.0 升储液桶 (5 穿刺器)

## 硬件规格

### 外形尺寸

13.5" x 7.5" x 12"

342.9 mm x 190.5 mm x 304.8 mm

### 重量

28 lb

12.7 kg

### 便携性

装置顶部有快装输液架挂载机构/把手

### 电源

115 伏或 220/240 伏交流输入

### 电池

内置、可充电, 供转运时使用  
无需加热即可操作所有功能

### 液压泵

滚柱式蠕动泵

流量 2.5-1000 mL/min

### 加热装置

最大输入功率 1440 瓦

### 触身部件类型

CF 型

### 防除颤

### 传感器

2 个空气探测器, 压力传感器, 2 个温度探头 (红外感应)、泵输液流量传感器, 开门探测器和阀启动传感器

### 控制计算机

内置, 控制所有功能

计算机出现故障时提供冗余硬件超驰控制保护

### 显示屏

LCD 型, 带防水触摸板

### • 外形尺寸

5.85" x 4.12"

148.1 mm x 104.7 mm

### • 有效显示区域

4.53" x 3.40"

115.1 mm x 86.3 mm

所有一次性用品均 100% 不含铝

有关我们提供的产品的更多信息, 请通过  
[sales@belmontmedtech.com](mailto:sales@belmontmedtech.com) 与我们联系。



患者  
加温



患者  
冷却



液体  
管理



780 BOSTON ROAD  
BILLERICA, MA 01821, 美国

美国: 866.663.0212  
全球: +1 978.663.0212  
传真: 978.663.0214

[WWW.BELMONTMEDTECH.COM](http://WWW.BELMONTMEDTECH.COM)



The Belmont® 快速输液器 RI-2 已根据适用标准在电击、火灾和机械危害方面进行了评估。

Belmont Instrument LLC  
已通过 ISO 13485 认证  
文件编号: A18173

Belmont Medical Technologies 是 Belmont Instrument, LLC 的商标  
2022 © Belmont Instrument, LLC | 701-00136-ZH Rev A