

## ALLON®-VEJLEDNING TRIN-FOR-TRIN: Normotermi-tilstand (standardindstilling)


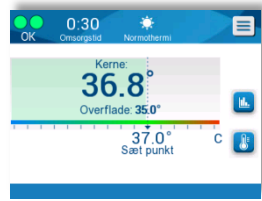
Indikation for brug: Oprethold forudindstillet kropstemperatur som bestemt af lægen. Oprethold normale kropstemperaturer under kirurgiske procedurer hos voksne og pædiatriske patienter.

### 1. Konfigurer

1.	Anbring Allon-apparatet på den ønskede placering og lås de forreste hjul.
2.	Fyld vandtanken så niveauet er mellem de to røde linjer, anvend kun <b>sterilt eller 0,22 mikron filtreret vand fra hanen.</b>
3.	Anbring den passende ThermoWrap® på operationsbordet (Se brugsvejledningen til ThermoWrap)
4.	Tilslut vandslangerne til ThermoWrap og til Allon-enheden, og lyt efter en kliklyd der opstår når hver slange tilsluttes. Sørg for at klemmerne på ThermoWrap er åbne.
5.	Tænd for Allon-enheden på <b>TÆND</b> . En komplet Selvttest udføres.
6.	Forvarmning af vandet udføres automatisk efter Selvttesten.
7.	Når dette er afsluttet, begynder systemet automatisk at tilføre varmt vand til ThermoWrap.
8.	Du kan vælge sætpunkttemperaturen (standard sætpunkt = 37,0 °C i normotermi-tilstand) eller vælge vandudløbstemperaturen i manuel tilstand (standard = 38,5 °C) ved hjælp af Sæt punkt-tasten.




### 2. Opvarmning

1.	Anbring patienten på ThermoWrap (efter omslaget er fyldt med vand). Se brugsanvisningen til ThermoWrap.	 
2.	Slut <b>Core (kerne)</b> -kablet til <b>Core (kerne)</b> -stikkontakten på højre side og <b>Surface (overflade)</b> -kablet til <b>Surface (overflade)</b> -stikkontakten på venstre side af systemet, således at farverne matcher, grå til grå og grøn til grøn, og sæt derefter temperatursonderne i de tilsvarende adapterkabler.	
3.	Indfør <b>Core (kerne)</b> -sonden i patienten og fastgør <b>Surface (overflade)</b> -sonden på patientens hud.	
4.	Sikr ThermoWrap på patienten.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I normotermi-tilstand reguleres patientens temperatur nu af Allon, som indstillet af lægen.</li> <li>I manuel tilstand reguleres vandtemperaturen nu af Allon, som indstillet af lægen.</li> </ul>	

\*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til Allon.


### 3. Køling

1.	Når patienten afkøles, skal Allon sættes i standby-tilstand	
2.	Vælg <b>STANDBY</b> fra menuen og behold denne tilstand, indtil klinikerens ønsker at maskinen skal varme.	
3.	For at forsætte opvarmning med Allon, vælg <b>BETJEN</b> fra menuen	

### 4. Frakobling

1.	Skift til standby-tilstand og vent et par sekunder
2.	Klem tilslutningerne på ThermoWrap tæt sammen, og pak patienten ud og fjern sonderne fra patienten
3.	Afkobl ThermoWrap fra Allon
4.	Kasser ThermoWrap og engangssonder

### 5. Efter brug af systemet: Retningslinjer for rengøring og desinfektion

1.	Kom natriumdichloroisocyanurat (NaDCC)-tabletter eller pulver i vandtanken i henhold til NaDCC-producentens anbefalinger og kørs 30 minutter i standby-tilstand.	
2.	Sådan tømmes vandtanken: Vælg <b>Tøm</b> i menuen Tjenester (se instruktioner i brugermanualen). Allon advarer dig når beholderen er tømt. <b>For hyppig brug (3-4 gange om ugen):</b> Tøm beholderen for vand en gang om ugen. <b>For sjælden brug:</b> Tøm beholderen for vand efter hver brug.	
3.	Rengør og desinficer maskinen og tilbehøret i henhold til hospitalets protokoller. Brug almindelige desinfektionsservietter når du desinficerer Allon-systemets ydre overflader, inklusive alle temperaturkabler, vandtilslutninger og tilslutninger.	

### 6. Vidste du?

1.	Brug af ThermoWrap erstatter <b>IKKE</b> almene retningslinjer for forhindring af tryksår. Fortsæt med at tage almene foranstaltninger til forebyggelse af tryksår når du bruger ThermoWrap.
2.	ThermoWrap må <b>IKKE</b> bruges som et værktøj til at løfte eller flytte patienten.
3.	Undgå ophobning af væske mellem huden og ThermoWrap.

\*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til Allon.