



ALLON® - INSTRUKCJA KROK PO KROKU: Tryb normotermii (domyślny)

Wskazania do użycia: Utrzymywanie uprzednio ustawionej temperatury ciała, zgodnie z decyzją lekarza. Podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów dorosłych i dzieci należy utrzymywać prawidłową temperaturę ciała.

1. Przygotowanie


1.	Umieścić urządzenie Allon w żądanym miejscu i zablokować przednie kółka.
2.	Napełnić zbiornik wody tak, aby jej poziom znajdował się między dwiema czerwonymi liniami, wodą sterylną lub wodą z kranu przefiltrowaną przez filtr 0,22-mikronowy.
3.	Umieścić odpowiedni koc ThermoWrap® na stole operacyjnym (<i>Patrz Instrukcja użycia koca ThermoWrap</i>)
4.	Podłączyć rurki wody do koca ThermoWrap i do urządzenia Allon, zwracając uwagę, czy słychać odgłos kliknięcia po podłączeniu każdej rurki. Upewnić się, że zaciski na kocu ThermoWrap są otwarte.
5.	Włączyć urządzenie Allon. Wykonywany jest pełny autotest.
6.	Wstępne podgrzewanie wody odbywa się automatycznie po przeprowadzeniu autotestu.
7.	Po zakończeniu system automatycznie rozpocznie cyrkulację ciepłej wody do koca ThermoWrap.
8.	Za pomocą przycisku nastawy można wybrać temperaturę nastawy (Nastawa domyślna = 37,0 °C w trybie normotermii) lub wybrać temperaturę odpływu wody w trybie ręcznym (Domyślna = 38,5 °C).


2. Ogrzewanie

1.	Ułożyć pacjenta na kocu ThermoWrap (po napełnieniu go wodą). Patrz instrukcja użycia koca ThermoWrap.	 
2.	Podłączyć przewód Wnętrze (Core) do gniazda Wnętrze (Core) po prawej stronie, a przewód Powierzchnia (Surface) do gniazda Powierzchnia (Surface) po lewej stronie systemu, dopasowując kolory (szary do szarego i zielony do zielonego), a następnie podłączyć sondy temperatury do odpowiednich adapterów.	
3.	Umieścić sondę temperatury Wnętrza (Core) w ciele pacjenta i sondę temperatury Powierzchni (Surface) na skórze pacjenta.	
4.	Zamocować koc ThermoWrap na ciele pacjenta.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> W trybie normotermii temperatura pacjenta jest teraz regulowana przez urządzenie Allon, zgodnie z ustawieniami przez lekarza. W trybie ręcznym temperatura wody jest teraz regulowana przez urządzenie Allon zgodnie z ustawieniami przez lekarza. 	

*Zapoznanie się z niniejszym dokumentem nie zwalnia z obowiązku przeczytania całego podręcznika użytkownika systemu Allon.

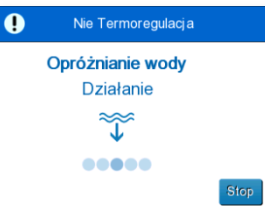
3. Chłodzenie

1.	Podczas chłodzenia pacjenta należy przełączyć urządzenie Allon w tryb oczekiwania	
2.	W menu wybrać TRYB OCZEKIWANIA i kontynuować takie ustawienie do czasu, gdy lekarz będzie chciał rozgrzać maszynę.	
3.	Aby wznowić podgrzewanie za pomocą urządzenia Allon, wybrać z menu opcję PRACA	

4. Rozłączanie

1.	Przełączyć do trybu oczekiwania i odczekać kilka sekund
2.	Zacisnąć złącza na kocu ThermoWrap i zdjąć koc z pacjenta oraz usunąć sondy z ciała pacjenta
3.	Odłączyć koc ThermoWrap od urządzenia Allon
4.	Wyrzucić koc ThermoWrap i jednorazowe sondy

5. Postępowanie po użyciu: Wytyczne czyszczenia i dezynfekcji

1.	Dodać tabletki lub proszek dichloroizocyjanuranu sodu (NaDCC) do zbiornika na wodę zgodnie z zaleceniami producenta środka NaDCC i uruchomić urządzenie na 30 minut w trybie oczekiwania.	
2.	Opróżnić zbiornik na wodę: Wybrać opcję Pusty w menu Usługi (patrz instrukcje w podręczniku użytkownika). Urządzenie Allon poinformuje użytkownika o opróżnieniu zbiornika. W przypadku częstego używania (3-4 razy w tygodniu): Opróżniać wodę raz w tygodniu. W przypadku rzadkiego stosowania: Opróżnić wodę po każdym użyciu.	
3.	Urządzenie i akcesoria należy czyścić i dezynfekować zgodnie z protokołem szpitalnym. Do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni systemu Allon, w tym wszystkich przewodów do pomiaru temperatury, połączeń wody i złączy, należy używać standardowych ściereczek do dezynfekcji.	

6. Czy wiesz, że?

1.	Zastosowanie koca ThermoWrap NIE zastępuje powszechnie obowiązujących zaleceń w zakresie profilaktyki odleżyn. Podczas korzystania z koca ThermoWrap należy kontynuować stosowanie standardowych środków w zakresie profilaktyki odleżyn.
2.	Koca ThermoWrap NIE wolno używać jako narzędzia do podnoszenia lub przenoszenia pacjenta.
3.	Unikać gromadzenia się płynów między skórą pacjenta a kocem ThermoWrap.

*Zapoznanie się z niniejszym dokumentem nie zwalnia z obowiązku przeczytania całego podręcznika użytkownika systemu Allon.