


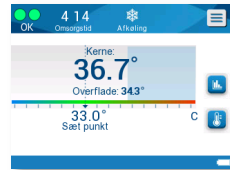





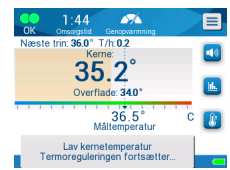
MÅLRETTEDE TEMPERATURSTYRING (TTM): CritiCool® MINI trin-for-trin-vejledning

Indikation for brug: CritiCool MINI er et termisk reguleringssystem, indikeret til overvågning og kontrol af patienttemperatur

1.	Fyld vandtanken med sterilt vand/0,22 filtreret vand	   
2.	Sæt systemet på ON. Efter en kort selvtest kommer en "Venligst vælg modus"-skærm frem	
3.	TTM er standardindstillingen. Tryk på OK for at vælge TTM	
4.	Vælg den passende CureWrap™ og anbring den på sengen eller under patienten (Se brugsanvisningen til CureWrap) <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at alle klemmer på CureWrap er indstillet til OPEN • Undlad at fastgøre omslaget på patienten på nuværende tidspunkt! 	
5.	Slut kerne-kablet til kerne -stikkontakten på højre side og overflade-kablet til overflade -stikkontakten på venstre side af systemet, således at farverne matcher, grå til grå og grøn til grøn, og sæt derefter temperatursonderne i de tilsvarende adapterkabler.	
6.	Fastgør kerne- og overfladetemperatursonderne på patienten <ul style="list-style-type: none"> • Overfladetemperatursonden må ikke anbringes under CureWrap • CritiCool kan ikke termoregulere uden kerneudlæsning 	
7.	Slut vandslanger til omslaget og CritiCool-apparat Vandet begynder selv at strømme ind i omslaget	
8.	Standard sætpunkttemperaturen er 33,5 °C. Hvis en ændring er påkrævet, skal sætpunktet ændres ved hjælp af sætpunktsnøglen: 	
9.	Vent, til CureWrap er fyldt med vand – Når påfyldningen er fuldført, fastgøres CureWrap til patienten (se brugsanvisningen til CureWrap)	
Termoregulering med CritiCool MINI er nu påbegyndt. <ul style="list-style-type: none"> • Bemærk: Det er normalt at se moderate udsving i patientens temperatur som en fysiologisk reaktion. 		

KONTROLLERET GENOPVARMNING


Patientens temperatur øges gradvist hver time med et forudindstillet trin.

1.	Vælg Vælg tilstand i rullemenuen i øverste højre side af skærmen	
2.	Vælg Kontrolleret genopvarmningstilstand og tryk på OK for at bekræfte	
3.	Beskeden "Switching to AutoRewarm Mode" kommer frem <ul style="list-style-type: none"> • Så længe denne besked vises, er genopvarmningen endnu ikke startet! 	
4.	Bekræft, at kernetemperaturudlæsningen er gyldig, tryk på OK og start genopvarmning	
Patientens temperatur stiger nu gradvist til den påkrævede måltemperatur. <ul style="list-style-type: none"> • Standard måltemperatur for CritiCool MINI er 36,5° C • Brugeren kan vælge måltemperatur mellem 30° C og 40° C ved at bruge måltemperaturnøglen (Se instruktioner i brugermanualen) • Et genopvarmningstrin (pr. time) skal være forhåndsindstillet i henhold til den kliniske protokol • CritiCool MINI anvender et standard genopvarmningstrin på 0,2 °C/time 		 

*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til CritiCool MINI.


MANUEL GENOPVARMNING

Brugeren kan manuelt øge patientens temperatur trinvist.


- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Brugeren kan øge sætpunkttemperaturen manuelt i henhold til genopvarmningsprotokollen, indtil måltemperaturen er opnået. |  |
| 2. | Anvend sætpunktsnøglen til at vælge sætpunktet.
<ul style="list-style-type: none"> • Bemærk: Det anbefales at øge sætpunkttemperaturen i trin på 0,2 °C til 0,3 °C per time | |

BESKEDER
"Kerneaflysning er for lav"

Udløser:	Kerneudlysning er mindst >2,0 °C under sætpunktet
Indikerer:	Denne besked indikerer forkert placering af kernetemperatursonden
Betydning:	Systemet stopper vandtilstrømningen til CureWrap og standser termoreguleringen!

- | | | |
|--|--|--|
| I tilfælde af at denne besked fremkommer: | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at kernetemperatursonden er sat korrekt i patienten, og at temperaturudlysningen er gyldig • Genplacér kernetemperatursonden hvis det er påkrævet • Tryk på OK for at bekræfte kernetemperaturudlysning Termoregulering fortsætter og skærmen går tilbage til TTM-modus.
Bemærk: I tilfælde af at systemet fortsætter med at måle lav kernetemperatur, gentages denne besked hver halve time. |  |
|--|--|--|

BESKEDER
"Lav kernetemperatur. Thermoregulation is Continuing..."

Udløser:	Patientens kernetemperatur er mellem 0,8 °C og 2,0 °C under sætpunktet	
Indikerer:	Denne besked indikerer forkert placering af kernetemperatursonden	
Betydning:	Termoregulering fortsætter	

- | | |
|--|---|
| I tilfælde af at denne besked fremkommer: | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at kernetemperatursonden er sat korrekt i patienten. • Hold øje med patientens temperatur. |
|--|---|

EFTER BRUG AF SYSTEMET: Før opbevaring eller mindst én gang om ugen

- Skift systemindstillingen til Standby. Vent et par sekunder, luk klemmerne på CureWrap, og frigør CureWrap og sonder fra patienten. Kom NaDCC i vandtanken i henhold til NaDCC-producentens anbefalinger og kørs 30 minutter i Standby-tilstand.
- Sådan tømmes vandtanken: Vælg Tøm i menuen Tjenester (se instruktioner i brugermanualen). CritiCool MINI advarer dig, når beholderen er tømt.
- Rengør og desinficer CritiCool MINI i henhold til hospitalets rutinebehandling.

*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til CritiCool MINI.