


## CONTROL DE LA TEMPERATURA DE DESTINO: CritiCool® MINI paso a paso

Indicaciones de uso: CritiCool MINI es un sistema de termostatación indicado para la monitorización y el control de la temperatura del paciente.

1. Llene el depósito de agua con agua estéril o agua filtrada con un filtro de 0,22 micras
2. **ENCIENDA** el sistema. Después de un breve autodiagnóstico, aparece la pantalla "Elija Modo"
3. Enfriamiento es el modo predeterminado. Toque **OK** para seleccionar Enfriamiento
4. Seleccione y coloque el CureWrap™ adecuado en la cama o debajo del paciente (consulte las instrucciones de uso de CureWrap)
  - **Asegúrese de que las abrazaderas de CureWrap estén ABIERTAS**
  - **¡No fije aún la envoltura al paciente!**
5. Conecte el cable Central al enchufe Central situada en la parte derecha y el cable Superficie al enchufe Superficie situada en la parte izquierda del sistema, haciendo coincidir los colores gris con gris y verde con verde. A continuación, enchufe las sondas de temperatura en los cables adaptadores correspondientes.
6. Conecte las sondas de temperatura central y de superficie al paciente
  - **No coloque la sonda de temperatura de superficie debajo del CureWrap**
  - **CritiCool no puede realizar la termostatación sin una lectura de temperatura central**
7. Conecte las mangueras de agua a la envoltura y al dispositivo CritiCool  
**El agua comienza a fluir automáticamente en la envoltura**
8. La temperatura del punto de ajuste predeterminado (SP) es de 33,5 °C. Si es necesario, cambie el punto de ajuste con el botón de punto de ajuste: 
9. Espere hasta que el CureWrap se llene con agua – Cuando termine el llenado, fije el CureWrap al paciente (consulte las instrucciones de uso de CureWrap)

### La termostatación con CritiCool MINI ya ha comenzado.

- **Nota: Es normal ver ligeras fluctuaciones en la temperatura del paciente como respuesta fisiológica.**




## RECALENTAMIENTO CONTROLADO

La temperatura del paciente aumenta gradualmente cada hora mediante un paso preestablecido.

1. Seleccione **Elija Modo** en el menú desplegable de la parte superior derecha de la pantalla
2. Seleccione el modo de **recalentamiento controlado** y toque **OK** para confirmar
3. Aparece el mensaje "Cambiando a modo de auto-recalentamiento"
  - **Mientras aparezca este mensaje, el recalentamiento aún no ha comenzado**
4. Confirme que la lectura de temperatura central sea válida, toque **OK** e inicie el recalentamiento

La temperatura del paciente comenzará a aumentar gradualmente hasta alcanzar la temperatura de destino necesaria.


- El valor predeterminado de temperatura de destino de recalentamiento del CritiCool MINI es de 36,5 °C
- El usuario puede seleccionar la temperatura de destino entre 30 °C y 40 °C con el botón de temperatura de destino (consulte las instrucciones del manual del usuario)
- Es necesario preestablecer un paso de recalentamiento (por hora) de acuerdo con el protocolo clínico
- CritiCool MINI utiliza un paso de recalentamiento predeterminado de 0,2 °C/hora

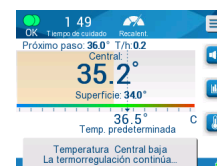

\*Este documento no reemplaza el requisito de leer el manual del usuario completo de CritiCool MINI.


## RECALENTAMIENTO MANUAL

El usuario puede aumentar manualmente la temperatura del paciente de forma gradual.

1.	El usuario aumenta la temperatura del punto de ajuste manualmente según el protocolo de recalentamiento hasta que se alcanza la temperatura de destino.	
2.	Utilice el botón de punto de ajuste para seleccionar el punto de ajuste. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nota: Se recomienda aumentar la temperatura del punto de ajuste en incrementos de 0,2 °C a 0,3 °C por hora</b></li> </ul>	


## MENSAJES

### "Lectura Central demasiado baja"

<b>Activador:</b>	La lectura de temperatura central es al menos >2,0 °C por debajo del punto de ajuste	
<b>Indica:</b>	Este mensaje puede indicar una colocación incorrecta de la sonda de temperatura central	
<b>Impacto:</b>	El sistema detendrá el flujo de agua al CureWrap y detendrá la termorregulación	
<b>Si aparece el mensaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la sonda de temperatura central esté insertada correctamente en el paciente y que la lectura de temperatura sea válida</li> <li>• Si es necesario, vuelva a colocar la sonda de temperatura central</li> <li>• Toque OK para confirmar la lectura de temperatura central</li> </ul> <p>La termorregulación continuará y la pantalla volverá al modo Enfriamiento. Nota: Si el sistema continúa midiendo una temperatura central baja, este mensaje se repetirá cada 30 minutos.</p>	

## MENSAJES

### "Temperatura Central baja. La termorregulación continúa..."

<b>Activador:</b>	La temperatura central del paciente se encuentra entre 0,8 °C y 2,0 °C por debajo del punto de ajuste	
<b>Indica:</b>	Este mensaje puede indicar una colocación incorrecta de la sonda de temperatura central	
<b>Impacto:</b>	La termorregulación continúa	
<b>Si aparece el mensaje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe que la sonda de temperatura central esté insertada correctamente en el paciente.</li> <li>• Siga controlando la temperatura del paciente.</li> </ul>	

## CUIDADO DESPUÉS DEL USO: Antes del almacenamiento, o al menos una vez a la semana

1.	Cambie el modo del sistema a En espera. Después de esperar unos segundos, cierre las abrazaderas del CureWrap y desconecte el CureWrap y las sondas del paciente. Ponga NaDCC en el depósito de agua según las recomendaciones del fabricante de NaDCC y procese durante 30 minutos en el modo en espera.
2.	Vaciar el depósito de agua: seleccione Vacío en el menú Servicios (consulte las instrucciones del manual del usuario). CritiCool MINI le avisará cuando el depósito se haya vaciado.
3.	Limpie y desinfecte CritiCool MINI de acuerdo con los cuidados hospitalarios habituales.

\*Este documento no reemplaza el requisito de leer el manual del usuario completo de CritiCool MINI.