


CONTRÔLE CIBLÉ DE LA TEMPÉRATURE : CritiCool® MINI Pas à pas

Indication d'utilisation : CritiCool MINI est un système de thermorégulation indiqué pour la surveillance et le contrôle de la température du patient

1. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau stérile / de l'eau filtrée 0,22 micron
2. Activer le système. Après un rapide Autotest, un écran Choisissez mode s'affiche
3. Refroidissement est le mode par défaut. Appuyer sur OK pour sélectionner « Refroidis »
4. Sélectionner et placer la combinaison CureWrap™ appropriée sur le lit ou sous le patient
(voir Mode d'emploi de CureWrap)
 - **S'assurer que les pinces de la combinaison CureWrap sont OUVERTES**
 - **Ne pas fixer la combinaison au patient à ce stade !**
5. Connecter le câble Core (Centrale) à la prise Core (Centrale) sur la droite et le câble Surface à la prise Surface sur la gauche du système, en appariant les couleurs, gris sur gris et vert sur vert, puis brancher les sondes de température aux câbles adaptateurs.
6. Fixer les sondes de température centrale et de surface sur le patient
 - **Ne pas placer la sonde de température de surface sous la combinaison CureWrap**
 - **CritiCool ne peut pas thermoréguler le patient sans lecture de la température centrale**
7. Connecter les tuyaux de raccordement d'eau à la combinaison et au dispositif CritiCool
L'eau commence automatiquement à circuler dans la combinaison
8. La température de consigne par défaut (SP) est de 33,5 °C. Si nécessaire, modifier la température de consigne en utilisant la touche Point de consigne :
9. Attendre que la combinaison CureWrap se remplisse d'eau – Lorsqu'elle est remplie, fixer la combinaison CureWrap au patient (voir Mode d'emploi de CureWrap)

La thermorégulation avec CritiCool MINI a commencé.

- **Remarque : Il est normal d'observer de légères fluctuations de la température du patient. Il s'agit d'une réponse physiologique.**

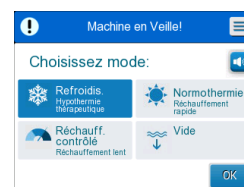

RÉCHAUFFEMENT CONTRÔLÉ

La température du patient augmente graduellement toutes les heures selon un palier prédéterminé.

1. Sélectionner Choisissez mode dans le menu déroulant en haut à droite de l'écran
2. Sélectionner le mode de réchauffement contrôlé et appuyer sur OK pour confirmer
3. Le message « Mettez sur mode autoréchauf. » s'affiche
 - **Tant que ce message apparaît à l'écran, cela signifie que le réchauffement n'a pas encore commencé !**
4. Confirmer que la lecture de la température centrale est valide, appuyer sur OK et démarrer le réchauffement

La température du patient va commencer à augmenter graduellement jusqu'à la température cible voulue.

- La température cible de réchauffement par CritiCool MINI est de 36,5 °C
- L'utilisateur peut sélectionner une température cible entre 30 et 40 °C grâce à la touche Température cible (Voir les instructions du manuel de l'utilisateur)
- Un palier de réchauffement (par heure) doit être prédéterminé selon le protocole clinique
- CritiCool MINI utilise un palier de réchauffement par défaut de 0,2 °C/heure



*Ce document ne se substitue pas à l'obligation de lire l'intégralité du manuel de l'utilisateur CritiCool MINI.

RÉCHAUFFEMENT MANUEL

L'utilisateur peut augmenter manuellement la température du patient, graduellement.

- L'utilisateur augmente manuellement la température de consigne, selon le protocole de réchauffement, jusqu'à atteindre la température cible.
- Utiliser la touche Point de consigne pour sélectionner le point de consigne.
 - Remarque : Il est recommandé d'augmenter la température de consigne par paliers de 0,2 °C-0,3 °C par heure**



MESSAGES

« Lecture Centre trop bass. »

Déclencheur :	La lecture de la température centrale est au moins > 2,0 °C en dessous du point de consigne
Indique :	Ce message peut indiquer un mauvais positionnement de la sonde de température centrale
Impact :	Le système interrompt le flux d'eau vers la combinaison CureWrap et arrête la thermorégulation !

Si le message apparaît :	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la sonde de température centrale est correctement insérée dans le patient et que la lecture de la température est valide Repositionner la sonde de température centrale si nécessaire Appuyer sur OK pour confirmer la lecture de la température centrale <p>La thermorégulation se poursuit et l'écran revient en mode Refroidis. Remarque : Si le système continue à mesurer une température centrale basse, ce message se répète toutes les 30 minutes.</p>
--------------------------	---




MESSAGES

« Température Centre basse. La Thermorégulation continue... »

Déclencheur :	La température centrale du patient est comprise entre 0,8 et 2,0 °C en dessous du point de consigne
Indique :	Ce message peut indiquer un mauvais positionnement de la sonde de température centrale
Impact :	La thermorégulation se poursuit

Si le message apparaît :	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la sonde de température centrale est correctement insérée dans le patient. Continuer à surveiller la température du patient.
--------------------------	--

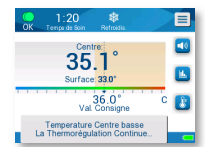

APRÈS L'UTILISATION : Avant le stockage, ou au moins une fois par semaine

- Changer le mode du système à Veille. Après quelques secondes, fermer les pinces de la combinaison CureWrap et détacher la combinaison CureWrap et les sondes du patient. Verser du DCCNa dans le réservoir d'eau en respectant les recommandations du fabricant du DCCNa et faire fonctionner pendant 30 minutes en mode Veille.
- Vider le réservoir d'eau : Sélectionner Vider dans le menu Fonctions programmées (voir les instructions du Manuel de l'utilisateur). CritiCool MINI vous alertera lorsque le réservoir sera vide.
- Nettoyer et désinfecter le système CritiCool MINI selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

*Ce document ne se substitue pas à l'obligation de lire l'intégralité du manuel de l'utilisateur CritiCool MINI.