


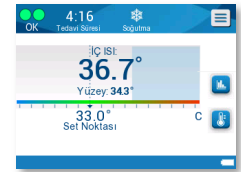
## HEDEFLENEN SICAKLIK YÖNETİMİ: CritiCool® MINI Adım Adım

**Kullanım endikasyonu:** CritiCool MINI, hasta sıcaklığını izlemek ve kontrol etmek için endike bir termal düzenleme sistemidir

1. Su tankını steril suyla/0,22 mikron filtreli suyla doldurun
2. Sistemi **AÇIN**. Kısa bir Öz Sınama sonrasında bir "Select Mode" (Mod Seç) ekranı görünür
3. TTM varsayılan moddur. TTM'yi seçmek için **OK**'e (TAMAM) dokunun
4. Uygun CureWrap™'i seçin ve yatağa ya da hastanın altına yerleştirin (CureWrap Kullanım Talimatına bakın)
  - **CureWrap klemplerinin AÇIK olduğundan emin olun**
  - **Sargıyı henüz hastaya sabitlemeyin!**
5. Gri-gri ve yeşil-yeşil olacak şekilde renkleri eşleştirerek **Core** (İç) kablosunu sistemin sağındaki **Core** (İç) soketine ve **Surface** (Yüzey) kablosunu sistemin solundaki **Surface** (Yüzey) soketine bağlayın ve ardından sıcaklık probalarını uygun adaptör kablolarına takın.
6. İç ve Yüzey sıcaklığı probalarını hastaya takın
  - **Yüzey sıcaklığı probunu CureWrap'in altına yerleştirmeyin**
  - **CritiCool, İç Isı okuması olmadan vücut ısısını düzenleyemez**
7. Su hortumlarını sargıya ve CritiCool cihazına bağlayın  
**Su otomatik olarak sargıya akmaya başlar**
8. Varsayılan Set Noktası (SP) Sıcaklığı 33,5 °C. Gerekirse, Set Noktası anahtarını kullanarak Set Noktasını değiştirin: 
9. **CureWrap suyla dolana kadar bekleyin** - Dolum işlemi tamamlandığında, CureWrap'ı hastaya sabitleyin (CureWrap Kullanım Talimatına bakın)

### CritiCool MINI ile termoregülasyon şimdi başladı.

- **Not: Fizyolojik yanıt olarak hastanın sıcaklığında hafif dalgalanmalar görülmesi normaldir.**




## KONTROLLÜ YENİDEN ISITMA

**Hastanın sıcaklığı önceden ayarlanan bir adımla her saat kademeli olarak artırılır.**

1. Ekranın sağ üst kısmında açılır menüden **Select Mode** (Mod Seç) öğesini seçin
2. **Controlled Rewarming** (Kontrollü Yeniden Isıtma) modunu seçin ve onaylamak için **OK**'e (TAMAM) dokunun
3. "Switching to AutoRewarm Mode" ("Otomatik Isıtma Moduna Geçiliyor") mesajı görünür
  - **Bu mesaj görüldüğü sürece Yeniden Isıtma henüz başlamamıştır!**
4. İç sıcaklığı değerinin geçerli olduğunu doğrulayın, yeniden ısıtmayı başlatmak için **OK**'e (TAMAM) dokunun

**Hastanın sıcaklığı şimdi kademeli olarak gereken Hedef Sıcaklığa doğru artmaya başlayacaktır.**

- CritiCool MINI yeniden ısıtma Hedef Sıcaklığı varsayılanı **36,5 °C**'dir
- Kullanıcı, Hedef Sıcaklık Anahtarını kullanarak 30 °C ila 40 °C arasında Hedef Sıcaklığı seçebilir (Kullanım kılavuzu talimatına bakın)
- Klinik protokole göre bir yeniden ısıtma adımı (saatlik) önceden ayarlanmalıdır
- CritiCool MINI, **0,2 °C/saat** varsayılan Yeniden Isıtma adımını kullanır

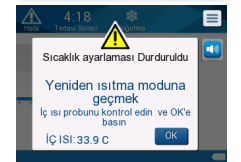

\*Bu belge, CritiCool MINI kullanım kılavuzunun tamamını okuma gereksiniminin yerine geçmez.

**MANUEL YENİDEN ISITMA**

Kullanıcı hastanın sıcaklığını manuel olarak kademeli şekilde artırabilir.


1. Kullanıcı, hedef sıcaklık elde edilene kadar Set Noktası sıcaklığını yeniden ısıtma protokolüne göre manuel olarak artırır.
2. Set Noktasını seçmek için Set Noktası anahtarını kullanın.
  - **Not: Set Noktası sıcaklığının saatte 0,2 °C-0,3 °C olarak kademeler halinde yükseltilmesi önerilir**

**MESAJLAR****"Core Readout too Low" ("İç Sıcaklığı Çok Düşük")**

<b>Tetikleme:</b>	İç sıcaklığı Set Noktasının altında en az >2,0 °C
<b>Belirtir:</b>	Bu mesaj, İç sıcaklığı probuna yanlış yerleştirme yapıldığını belirtir
<b>Etki:</b>	Sistem CureWrap'e su akışını ve termoregülasyonu durduracaktır!

**Şu mesaj görünürse:**

- İç sıcaklığı probunun hastaya doğru bir şekilde yerleştirildiğini ve sıcaklık değerinin geçerli olduğunu kontrol edin
  - Gerekirse İç sıcaklığı probunu yeniden konumlandırın
  - İç sıcaklığı değerini onaylamak için OK'e (TAMAM) dokununuz
- Termoregülasyon devam edecektir ve ekran TTM moduna geri dönecektir.
- Not: Sistem düşük İç sıcaklığı ölçmeye devam ederse, bu mesaj 30 dakikada bir tekrarlanacaktır.

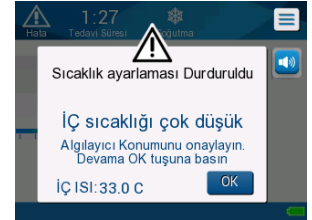**MESAJLAR****"Low Core Temperature. Thermoregulation is Continuing..." ("Düşük İç Sıcaklığı. Termoregülasyon Devam Ediyor...")**

<b>Tetikleme:</b>	Hastanın İç sıcaklığı Set Noktasının 0,8 °C ila 2,0 °C altındadır
<b>Belirtir:</b>	Bu mesaj, İç sıcaklığı probuna yanlış yerleştirme yapıldığını belirtir
<b>Etki:</b>	Termoregülasyon devam eder
<b>Şu mesaj görünürse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• İç sıcaklığı probunun hastaya doğru bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.</li><li>• Hastanın sıcaklığını izlemeye devam edin.</li></ul>

**KULLANIM SONRASI BAKIM: Saklamadan önce veya en az haftada bir kez**

1. Sistem modunu Beklemede olarak değiştirin. Birkaç saniye bekledikten sonra CureWrap'teki klempleri kapatın ve CureWrap'i ve problemleri hastadan çıkarın. NaDCC üreticisi önerilerine göre su tankına NaDCC damlatın ve 30 dakika boyunca Bekleme modunda çalıştırın.
2. Su deposunu boşaltın: Servisler menüsünden Boşaltma ögesini seçin (talimat için kullanım kılavuzuna bakın). Tank boşaldığında CritiCool MINI sizi uyaracaktır.
3. Hastane rutin bakımına göre CritiCool MINI'yi temizleyin ve dezenfekte edin.

\*Bu belge, CritiCool MINI kullanım kılavuzunun tamamını okuma gereksiniminin yerine geçmez.