




MÅLRETTET TEMPERATURSTYRING: CritiCool® Spædbarn, trin-for-trin

Indikation for brug: CritiCool er et termisk reguleringssystem, indikeret til overvågning og kontrol af patienttemperatur

1.	Fyld vandtanken med sterilt vand/0,22 mikron filtreret vand.	
2.	Anbring CritiCool-apparatet på den ønskede placering, og lås de forreste hjul.	
3.	Sæt systemet på ON . Efter en kort selvtest kommer en "Venligst vælg modus"-skærm frem. Vandet i CritiCool begynder at køle ned.	
4.	Vælg den passende CureWrap®, og anbring den på sengen eller under patienten (se brugsanvisningen til CureWrap). <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at CureWrap-klemmerne er ÅBNE • Undlad at fastgøre omslaget på patienten på nuværende tidspunkt! 	
5.	Slut Core -kablet til Core -stikkontakten på højre side og Surface -kablet til Surface -stikkontakten på venstre side af systemet, således at farverne matcher, grå til grå og grøn til grøn, og sæt derefter temperatursonderne i de tilsvarende adapterkabler.	
6.	Fastgør kerne- og overfladetemperatursonderne på patienten. <ul style="list-style-type: none"> • Overfladetemperatursonden må ikke anbringes under CureWrap • CritiCool kan ikke termoregulere uden kerneudlæsning 	
7.	Tillut vandslanger til omslaget og CritiCool-apparatet. <ul style="list-style-type: none"> • Vandet begynder selv at strømme ind i omslaget 	
8.	Vend tilbage til berøringsskærmen. TTM er standardindstillingen og er allerede fremhævet. Tryk på OK for at vælge TTM.	
9.	Standardsætpunkttemperaturen (SP) er 33,5 °C. Hvis det er påkrævet, ændres sætpunkt ved at bruge sætpunktstasten: 	
10.	Vent, til CureWrap er fyldt med vand – Når påfyldningen er fuldført, fastgøres CureWrap til patienten (se brugsanvisningen til CureWrap)	



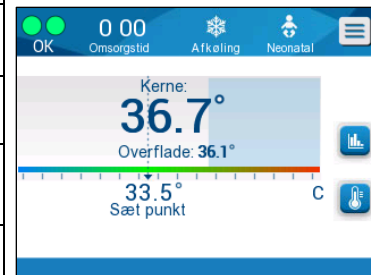


Termoregulering med CritiCool er nu påbegyndt.


Bemærk: Det er normalt at se moderate udsving i patientens temperatur som en fysiologisk reaktion.

KONTROLLERET GENOPVARMNING


Patientens temperatur øges gradvist hver time med et forudindstillet trin.

1.	Vælg Venligst vælg modus i rullemenuen i øverste højre side af skærmen.	
2.	Vælg tilstanden Kontrolleret genopvarmning , og tryk på OK for at bekræfte.	
3.	Beskeden "Skift til auto genopvarm modus" vises. <ul style="list-style-type: none"> • Så længe denne besked vises, er genopvarmningen endnu ikke startet! Genplacér kernesonden, hvis det er nødvendigt. Bekræft, at kernetemperatur aflæsningen er gyldig. Vent på, at kerne aflæsningen stabiliseres. Tryk på OK for at starte genopvarmningen.	
4.	Patientens temperatur stiger nu gradvist til den påkrævede måltemperatur. <ul style="list-style-type: none"> • CritiCool's standardmåltemperatur for genopvarmning er 36,5° C. • Brugeren kan vælge måltemperatur mellem 30° C og 40° C ved at bruge måltemperaturtasten (Se instruktioner i brugermanualen). • Et genopvarmningstrin (per time) skal være forhåndsindstillet i henhold til den kliniske protokol. • CritiCool anvender et standardgenopvarmningstrin på 0,2 °C/time. 	 


MANUEL GENOPVARMNING
Brugeren kan manuelt øge patientens temperatur trinvist.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Brugeren kan øge sætpunkttemperaturen manuelt i henhold til genopvarmningsprotokollen, indtil måltemperaturen er opnået. |  |
| 2. | Anvend sætpunktstasten til at vælge sætpunktet. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bemærk: Det anbefales at øge sætpunkttemperaturen i trin på 0,1 °C til 0,25 °C/30 min.</i> | |

BESKEDER
"Kernevisning for lav"

Udløser:	Kerneudlæsning er mindst >2,0 °C under sætpunktet	
Indikerer:	Denne besked indikerer forkert placering af kernetemperatursonden	
Betydning:	Systemet stopper vandtilstrømningen til CureWrap og standser termoreguleringen!	
I tilfælde af at denne besked fremkommer:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genplacér først kernetemperatursonden hvis det er påkrævet. 2. Kontrollér, at kernetempuraflæsningen er gyldig og stabil. 3. Tryk der næst på OK for at bekræfte kernetemperaturudlæsning. Med kontrolleret genopvarmning er det især vigtigt at sørge for, at kernetempuraflæsningen er korrekt, INDEN der trykkes på OK-knappen. Hvis der trykkes på OK-knappen, inden det bekræftes, at kernetemperaturen er korrekt, vil algoritmerne for den termiske regulering muligvis blive påvirket. Termoregulering fortsætter, og skærmen vender tilbage til TTM-tilstand. Bemærk: I tilfælde af at systemet fortsætter med at måle lav kerntemperatur, gentages denne besked hver halve time.	

BESKEDER
"Lav kerntemperatur. Termoreguleringen fortsætter..."

Udløser:	Hvis forskellen mellem patientens kerntemperatur og sætpunktet er >0,8° C men <2,0 °C	
Indikerer:	Denne besked indikerer forkert placering af kerntemperatursonden	
Betydning:	Termoregulering fortsætter	
I tilfælde af at denne besked fremkommer:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at kerntemperatursonden er sat korrekt i patienten. • Kontrollér, at kerntempuraflæsningen er gyldig og stabil. • Hold øje med patientens temperatur. 	

PLEJE AF SYSTEMET EFTER BRUG: Før opbevaring eller mindst én gang om ugen

- | | |
|----|---|
| 1. | Skift systemindstillingen til Standby. Vent et par sekunder, luk klemmerne på CureWrap, og frigør CureWrap og sonder fra patienten. Kom NaDCC i vandtanken i henhold til NaDCC-producentens anbefalinger, og køør 30 minutter i Standby-tilstand. |
| 2. | Tøm vandtanken: Vælg Tøm i menuen Tjenester (se instruktioner i brugermanualen). Hvis meddelelsen "Tjek rør" vises, skal du tilslutte handræningskonnektoren til det andet rør og derefter tømme det. CritiCool advarer dig, når det er fuldført. |
| 3. | Rengør og desinficer CritiCool i henhold til hospitalets rutinebehandling. |

Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til CritiCool 6.4.

