


ALLON® STAPSGEWIJZE WERKING: Normothermia-modus (standaard)

Indicatie voor gebruik: De vooraf ingestelde lichaamstemperatuur, zoals bepaald door de arts, behouden. Normale lichaamstemperatuur behouden tijdens chirurgische ingrepen bij volwassen en pediatrie patiënten.

1. INSTALLATIE


- Plaats de Allon-unit op de gewenste plaats en vergrendel de voorste wielen.
- Vul de watertank zodat het niveau tussen de twee rode lijnen ligt met **uitsluitend steriel of 0,22 micron gefilterd leidingwater**.
- Plaats de juiste ThermoWrap® op de operatietafel (*zie de gebruiksaanwijzing van de ThermoWrap®*)
- Sluit de waterslangen aan op ThermoWrap en op het Allon-apparaat terwijl u luistert naar een klikgeluid wanneer elke slang wordt aangesloten. Zorg ervoor dat de klemmen op de ThermoWrap geopend zijn.
- Het Allon-hulpmiddel **INSCHAKELEN**. Een volledige zelftest wordt uitgevoerd.
- De voorverwarming van het water wordt automatisch uitgevoerd na de zelftest.
- Zodra dit klaar is, begint het systeem automatisch warm water naar de ThermoWrap te doen stromen.
- 

U kunt de setpunttemperatuur (standaard setpunt = 37,0 °C in de normothermia-modus) of de water-uit temperatuur in de handmatige modus (standaard = 38,5 °C) selecteren met behulp van de setpunttoets.
- Zorg ervoor dat de alarmen van het apparaat **AAN** staan. Als het volgende bericht "Alle alarmen temp-sensoren **UIT**" onderaan het scherm wordt weergegeven, volg dan deze stappen om de alarmen weer in te schakelen. Ga naar **MENU**, selecteer **SETTINGS**, voer het wachtwoord **6873** in, selecteer "Temp Sensor Alarms" **AAN**, druk op **OK** om de selectie te bevestigen.

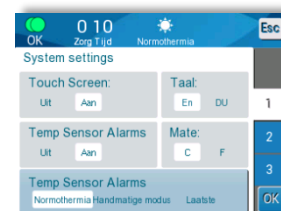

2. AAN HET OPWARMEN

- Positioneer de patiënt op de ThermoWrap (nadat de wrap gevuld is met water). Zie de gebruiksaanwijzing van ThermoWrap.
- Sluit de **Kern**-kabel aan op de **Core**-aansluiting rechts en de **Oppervlak**-kabel op de **Surface**-aansluiting links op het systeem. Laat de kleuren van de kabels overeenkomen (grijs op grijs en groen op groen), en sluit vervolgens de temperatuursondes aan op de juiste adapterkabels.
- Plaats de **Kern**-sonde in de patiënt en bevestig de **Oppervlak**-sonde op de huid van de patiënt.
- Bevestig ThermoWrap op de patiënt.
- In de normothermia-modus wordt de temperatuur van de patiënt door Allon geregeld zoals ingesteld door de arts.
 - In de handmatige modus wordt de watertemperatuur door Allon geregeld zoals ingesteld door de arts.

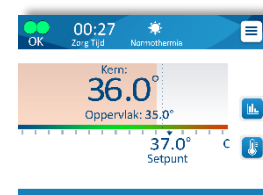

*Dit document vervangt de verplichting om de volledige Allon-gebruikershandleiding te lezen niet.

3. KOELEN

1. Bij het koelen van de patiënt moet Allon worden overgeschakeld naar de stand-bymodus
2. Selecteer **STAND-BY** in het menu en blij in deze modus totdat de arts wil dat het apparaat verwarmt.
3. Om de verwarming met Allon te hervatten, selecteert u **BEDRIJF** in het menu



4. ONTKOPPELEN

1. Schakel over naar de stand-bymodus en wacht enkele seconden
2. Klem connectoren vast op ThermoWrap en wikkel de patiënt uit en verwijder de sondes van de patiënt
3. Ontkoppel de ThermoWrap van Allon
4. Gooi ThermoWrap en wegwerpsondes weg

5. ONDERHOUD NA GEBRUIK: RICHTLIJNEN VOOR REINIGING EN DESINFECTIE

1. Laat natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC)-tabletten of -poeder in de watertank vallen volgens de aanbevelingen van de fabrikant van NaDCC en draai gedurende 30 minuten in de stand-bymodus.
2. Maak de watertank leeg: Selecteer **Leeg** in het menu Services (zie de gebruikershandleiding voor instructies). Allon waarschuwt u als de tank leeg is.
 - **Voor frequent gebruik (3-4 keer per week):** Laat het water één keer per week weggelopen en spoel het na met steriel of 0,22 micron gefilterd water.
 - **Voor niet-frequent gebruik:** Laat het water na elk gebruik weggelopen en spoel het na met steriel of 0,22 micron gefilterd water.
3. Reinig en desinfecteer de machine en de accessoires volgens het ziekenhuisprotocol. Gebruik standaard desinfectiedoeekjes voor het desinfecteren van externe oppervlakken van het Allon-systeem, inclusief alle temperatuurkabels, wateraansluitingen en connectoren, en de dop, ketting en ankerringconstructie.



4. WIST U DAT?

1. Het gebruik van ThermoWrap vervangt de gebruikelijke praktijkrichtlijnen om decubitus te voorkomen **NIET**. Ga door met het gebruik van de standaard drukpreventieve maatregelen bij het gebruik van de ThermoWrap.
2. Een ThermoWrap mag **NIET** worden gebruikt als hulpmiddel om de patiënt op te tillen of te verplaatsen.
3. Vermijd ophoping van vloeistoffen tussen de huid en de ThermoWrap.