


ALLON® – INSTRUKCJA KROK PO KROKU: Tryb normotermii (domyślny)

Wskazania do użycia: Utrzymywanie uprzednio ustawionej temperatury ciała, zgodnie z decyzją lekarza. Podczas zabiegów chirurgicznych u pacjentów dorosłych i dzieci należy utrzymywać prawidłową temperaturę ciała.

1. KONFIGURACJA



- Umieścić urządzenie Allon w żądanym miejscu i zablokować przednie kółka.
- Napełnić zbiornik wody tak, aby jej poziom znajdował się między dwiema czerwonymi liniami, **wodą sterylną lub wodą z kranu przefiltrowaną przez filtr 0,22 µm.**
- Umieścić odpowiedni koc ThermoWrap® na stole operacyjnym (*Patrz Instrukcja użycia koca ThermoWrap*)
- Podłączyć rurki wody do koca ThermoWrap i do urządzenia Allon, zwracając uwagę, czy słychać odgłos kliknięcia po podłączeniu każdej rurki. Upewnić się, że zaciski na kocu ThermoWrap są otwarte.
- Włączyć** urządzenie Allon. Wykonywany jest pełny autotest.
- Wstępne podgrzewanie wody odbywa się automatycznie po przeprowadzeniu autotestu.
- Po zakończeniu system automatycznie rozpocznie cyrkulację ciepłej wody do koca ThermoWrap.
- 

Za pomocą przycisku nastawy można wybrać temperaturę nastawy (Nastawa domyślna = 37,0°C w trybie normotermii) lub wybrać temperaturę odpływu wody w trybie ręcznym (Domyślna = 38,5°C).
- Upewnić się, że alarmy urządzenia są **włączone**. Jeśli w dolnej części ekranu pojawi się komunikat „**WYLACZENIE** wszystkich alarmów cz. Temp”, wykonać następujące czynności, aby ponownie włączyć alarmy. Przejść do **MENU**, wybrać **SETTINGS**, wpisać hasło **6873**, wybrać **WL** w „Temp Sensor Alarms”, nacisnąć **OK**, aby potwierdzić wybór.

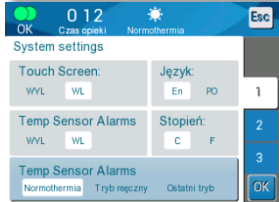2. OGRZEWANIE

- Ułożyć pacjenta na kocu ThermoWrap (po napełnieniu go wodą). Patrz instrukcja użycia koca ThermoWrap.
- Podłączyć przewód **rdzenia** do gniazda **Core** po prawej stronie, a przewód **powierzchni** do gniazda **Surface** po lewej stronie systemu, dopasowując kolory (szary do szarego i zielony do zielonego), a następnie podłączyć sondy temperatury do odpowiednich adapterów.
- Umieścić sondę temperatury **rdzenia** w ciele pacjenta i sondę temperatury **powierzchni** na skórze pacjenta.
- Zamocować koc ThermoWrap na ciele pacjenta.
- W trybie normotermii temperatura pacjenta jest teraz regulowana przez urządzenie Allon, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez lekarza.
 - W trybie ręcznym temperatura wody jest teraz regulowana przez urządzenie Allon zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przez lekarza.

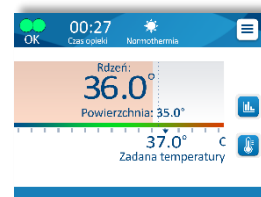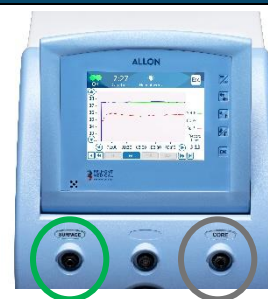

* Zapoznanie się z niniejszym dokumentem nie zwalnia z obowiązku przeczytania całego podręcznika użytkownika systemu Allon.

3. CHŁODZENIE

1. Podczas chłodzenia pacjenta należy przełączyć urządzenie Allon w tryb czuwania
2. W menu wybrać **TRYB CZUWANIA** i kontynuować takie ustawienie do czasu, gdy lekarz będzie chciał rozgrzać maszynę.
3. Aby wznowić podgrzewanie za pomocą urządzenia Allon, wybrać z menu opcję PRACA



4. ROZŁĄCZANIE

1. Przełączyć do trybu czuwania i odczekać kilka sekund
2. Zaciśnąć złącza na kocu ThermoWrap i zdjąć koc z pacjenta oraz usunąć sondy z ciała pacjenta
3. Odłączyć koc ThermoWrap od urządzenia Allon
4. Wyrzucić koc ThermoWrap i jednorazowe sondy

5. PIELĘGNACJA PO UŻYCIU: WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI

1. Dodać tabletki lub proszek dichloroizocyjanuranu sodu (NaDCC) do zbiornika na wodę zgodnie z zaleceniami producenta środka NaDCC i uruchomić urządzenie na 30 minut w trybie czuwania.
2. Opróżnić zbiornik na wodę: Wybrać opcję **Opróżnianie** w menu Usługi (patrz instrukcje w podręczniku użytkownika). Urządzenie Allon poinformuje użytkownika o opróżnieniu zbiornika.
 - **W przypadku częstego używania (3-4 razy w tygodniu):** Raz w tygodniu spuścić wodę i przepłukać wodą sterylną lub wodą filtrowaną przy użyciu filtra 0,22 µm.
 - **W przypadku rzadkiego stosowania:** Po każdym użyciu spuścić wodę i przepłukać wodą sterylną lub wodą filtrowaną przy użyciu filtra 0,22 µm.
3. Urządzenie i akcesoria należy czyścić i dezynfekować zgodnie z protokołem szpitalnym. Do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni systemu Allon, w tym wszystkich przewodów do pomiaru temperatury, połączeń wody i złączy oraz zatyczki, łańcucha i zespołu pierścienia kotwiczącego, należy używać standardowych ściereczek do dezynfekcji.



4. CZY WIESZ, ŻE...?

1. Zastosowanie koca ThermoWrap **NIE** zastępuje powszechnie obowiązujących zaleceń w zakresie profilaktyki odleżyn. Podczas korzystania z koca ThermoWrap należy kontynuować stosowanie standardowych środków w zakresie profilaktyki odleżyn.
2. Koca ThermoWrap **NIE** wolno używać jako narzędzia do podnoszenia lub przenoszenia pacjenta.
3. Unikać gromadzenia się płynów między skórą pacjenta a kocem ThermoWrap.