


ALLON® ADIM ADIM ÇALIŞTIRMA: Normotermi Modu (Varsayılan)

Kullanım endikasyonu: Hekimin belirlediği önceden ayarlanmış vücut sıcaklığını idame ettirmek. Yetişkin ve pediyatrik hastalarda cerrahi işlemler sırasında normal vücut sıcaklıklarını idame ettirmek.


1. KURULUM

- Allon üniteyi istenen konuma yerleştirin ve ön tekerlekleri kilitleyin.
- Su deposunu iki kırmızı çizginin arasındaki seviyeye kadar yalnızca **steril su veya 0,22 mikron filtrelenmiş çeşme suyuyla** doldurun.
- Uygun ThermoWrap®'i ameliyat masasına koyun (*ThermoWrap'in kullanma talimatına bakın*)
- Su hortumlarını her bir hortum bağlandığında klik sesini duyarak ThermoWrap'e ve Allon cihaza bağlayın. ThermoWrap'teki tüm klemplerin açık olduğundan emin olun.
- Allon cihazı **AÇIN**. Tam otomatik test gerçekleştirilir.
- Su ön ısıtma, otomatik testten sonra otomatik olarak gerçekleştirilir.
- Tamamlandıktan sonra sistem, otomatik olarak ThermoWrap'e sıcak su akışını başlatır.
-  Set noktası düğmesiyle set noktası sıcaklığını (Normotermi modunda varsayılan set noktası = 37,0 °C) veya Manuel modunda su çıkış sıcaklığını (varsayılan = 38,5 °C) seçebilirsiniz.
- Cihaz alarmlarının **AÇIK** olduğundan emin olun. Ekranın alt kısmında "Tüm Isı Prob Alarmları **Kapalı**" mesajı görünüyorsa alarmları tekrar açmak için şu adımları izleyin. **MENÜ'**ye gidin, **AYARLAR'**ı seçin, parolayı **6873** girin, "Temp Sensor Alarms" için **ON** seçeneğini etkinleştirin, seçiminizi onaylamak için **OK** düğmesine basın.

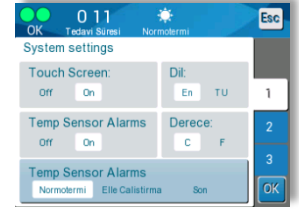

2. ISITMA

- Hastayı ThermoWrap'in üstüne konumlandırın (sargı suyla dolduktan sonra). ThermoWrap'in kullanma talimatına bakın.
- Gri- gri ve yeşil- yeşil olacak şekilde renkleri eşleştirerek **İç Isı** kablosunu sistemin sağındaki **İç Isı** soketine ve **Yüzey** kablosunu sistemin solundaki **Yüzey** soketine bağlayın ve ardından sıcaklık probalarını uygun adaptör kablolarına takın.
- İç probunu hastanın içine ve **Yüzey** probunu hastanın cildine takın.
- ThermoWrap'i hastanın üstüne sabitleyin.
- Normotermi modunda hastanın sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.
 - Manuel modunda suyun sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.

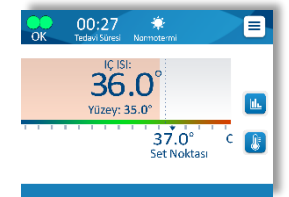

*Bu belge, Allon'un kullanım kılavuzunun tamamını okuma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

3. SOĞUTMA

1. Hastayı soğuturken Allon, Bekleme moduna geçirilmelidir.
2. Menüden **BEKLEME** ögesini seçin ve klinisyen makinenin ısıtmasını isteyene kadar bu modda kalın.
3. Allon'la ısıtmaya devam etmek için menüden **ÇALIŞTIR** ögesini seçin.



4. AYIRMA

1. Bekleme moduna geçin ve birkaç saniye bekleyin.
2. Konnektörleri ThermoWrap'e sıkı bir şekilde klempleyin, hastanın sargısını açın ve problemleri hastadan çıkarın.
3. ThermoWrap'i Allon'dan ayırın.
4. ThermoWrap'i ve tek kullanımlık problemleri atın.

5. KULLANIM SONRASI BAKIM: TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YÖNERGELERİ

1. NaDCC üreticisinin önerilerine göre su deposuna sodyum dikloroizosiyanürat (NaDDC) tablet veya tozu ekleyin ve 30 dakika boyunca Bekleme modunda çalıştırın.
2. Su tankını boşaltın: Servisler menüsünden **Boşaltma** ögesini seçin (talimat için Kullanım Kılavuzuna bakın). Allon, depo boşaldığında sizi uyarır.
 - **Sık kullanım (haftada 3-4 kez) için:** Haftada bir kez suyu tahliye edin ve steril veya 0,22 mikron filtrelenmiş suyla durulama yapın.
 - **Nadir kullanım için:** Her kullanımdan sonra suyu tahliye edin ve steril veya 0,22 mikron filtrelenmiş suyla durulama yapın.
3. Makine ve aksesuarları hastane protokolü uyarınca temizleyin ve dezenfekte edin. Tüm sıcaklık kabloları, su bağlantıları, konnektörler ve kapak, zincir ve ankraj halkası grubu dahil olmak üzere Allon sisteminin harici yüzeylerini standart dezenfeksiyon mendilleriyle dezenfekte edin.



4. BİLİYOR MUYDUNUZ?

1. ThermoWrap kullanımı, bası yaralarını önlemeye yönelik yaygın pratik kılavuzlarının **YERİNE GEÇMEZ**. ThermoWrap'i kullanırken standart bası yarası önleme tedbirlerini kullanmaya devam edin.
2. ThermoWrap, hastayı kaldırmaya veya hareket ettirmeye yönelik bir araç olarak **KULLANILMAMALIDIR**.
3. Cilt ve ThermoWrap arasında sıvı birikmesinden kaçının.