

INSTRUKTIONER TIL DESINFEKTION AF ALLON® VANDKREDSLØB

1. NØDVENDIGE VÆRKTØJER TIL DESINFEKTION				
A.	Allon® Desinfektionssæt (P/N 405-00024) inkluderer:			
	Omledningsslange med 2 konnektorer		P/N 200-00181	
	Temperatursimulator		P/N 017-00245	
B.	PPE (personligt beskyttelsesudstyr) i henhold til anvisningerne fra producenten af NaDCC-tabletten.			
C.				Natriumdichloroisocyanurat (NaDCC)-tabletter i den anbefalede koncentration (Som angivet i tablet 1)
D.	Desinfektionsservietter af hospitalskvalitet			
E.	Sterilt vand/0,22 µm filtreret vand (ca. 12 liter i alt) BEMÆRK: Undlad at anvende afioniseret vand eller vand dannet via omvendt osmose, da det kan fremme korrosion af systemets metaldele.			

2. DESINFEKTIONS- HYPPIGHED
Før første anvendelse
Mindst en gang hver tredje måned
Før langtidsopbevaring (>3 måneder)
Før brug efter længerevarende opbevaring (>3 måneder)
BEMÆRK: Desinfektion kan foretages oftere, hvis hospitalets retningslinjer foreskriver det.
BEMÆRK: Hvis en patient, en kliniker eller biologisk materiale kommer i kontakt med vandkredsløbet, skal det desinficeres straks efter.

Tabel 1

Tabletter, der er nødvendige for at opnå en NaDCC-koncentration på mindst
5382 ppm

PurTabs® (13,1 g)	Klorsept® 87 (17,4 g)	Aquatabs® (8,68 g)
8 tabletter pr. 6 l vand	7 tabletter pr. 6 l vand	7 tabletter pr. 6 l vand

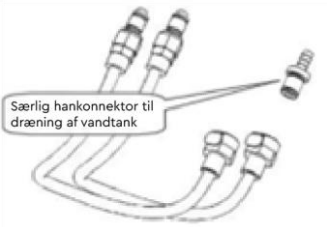
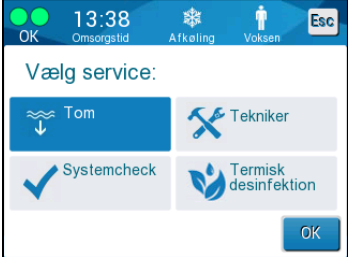
3. KLARGØRING OG DESINFEKTION AF ENHEDEN

A.		Sørg for, at enheden er SLUKKET. Kontrollér niveauet i vandbeholderen. Hvis niveauet i vandbeholderen er under den røde streg, skal der tilføjes sterilt eller 0,22 µm filtreret vand med stuetemperatur, indtil vandniveauet er mellem de 2 røde pile, for at sikre, at maskinen har 6 l. BEMÆRK: Alternativt kan du klargøre denne desinfektionsopløsning i en separat beholder i henhold til anvisningerne fra producenten af NaDCC-tabletten..
B.	PPE påkrævet	Brug det relevante PPE i henhold til brugsanvisningen fra producenten af NaDCC-tabletten.

	Tilføj NaDCC	Fjern hættten, kæden og ankerringen fra enhedens vandbeholder. Fremskaf de relevante NaDCC-tabletter, og tilføj det korrekte antal i enhedens vandbeholder i henhold til tabel 1 . BEMÆRK: Desinficér ikke i nærheden af det område, der skal behandles.		
C.				Lad tabletterne opløses i 15 minutter . Mens tabletterne opløses, udføres de resterende trin i trin C . BEMÆRK: Lad ikke opløsningen med den opløste tablet være i enhedens vandbeholder længere end 20 minutter .
	2-konnektor	Aftør hættten, kæden og ankerringen med desinfektionsservietter af hospitalskvalitet, og sæt derefter hættten, kæden og ankerringen på igen. Slut de blå slanger (P/N 200-00109) til omledningsslangeenheden med 2 konnektorer (P/N 200-00181). Slut de andre ender til de blå slanger på enheden.		
	P/N 200-00181 			
	D.	Sæt enheden i stikkontakten, TÆND den, og lad selvtesten køre færdig.		
E.		Vælg og betjen enheden i Normothermi-tilstand. Sæt patientindstillingspunktet til 37 °C.		
F.		Sæt temperatursimulatoren (P/N 017-00245) ind i kernetemperaturstikket på forsiden af enheden, og sæt den til 36,0 °C ±0,3 ved at dreje på drejeknappen og se på skærmen.		
G.		Lad opløsningen cirkulere i 5 minutter (mindst) til 6 minutter (højst) for at desinficere enhedens vandkredsløb . Sæt enheden i standby-tilstand, når det er fuldført.		
H.	Fjern omledningsslangeenheden fra det tilsluttede blå slangesæt. Dræn opløsningen fra enhedens vandbeholder i henhold til instruktionerne i tabel 2 . Bortskaf rengøringsmidlet i henhold til hospitalets retningslinjer.			
I.	Skyllecyklus	Fortsæt til afsnit 4 "Skyllecyklus" for at fuldføre desinfektions- og rengøringsproceduren.		

Tabel 2

TØMNING AF VANDBEHOLDEREN

A.	HVIS ET OMSLAG ER TILSLUTTET: I et område væk fra patientpleje, med systemet slukket, skal du klemme fast og frakoble omslaget fra de forbindende vandslanger. Bortskaf omslaget.	
B.		Tilslut en hankonnektor til dræning til " vand ud "-siden på de forbindende vandslanger, og placer slangen i en spand eller vask til indsamling af vandet. (se billede i trin E i tabel 2) BEMÆRK: Bortskaf rengøringsmidlet i henhold til hospitalets retningslinjer. Tænd systemet.
C.		Vælg Tøm på hovedskærmen, eller gå til Tøm ved at trykke på Menu -ikonet  og derefter vælg Service og derefter Tøm .
D.		Tryk på OK . Følgende skærm kommer frem. Når du er klar til at starte processen, trykker du på Start .
E.		Hvis fejlmeddelelsen "Forbind vandslanger" vises, betyder det, at hankonnektoren til dræning er forbundet til vandindløbet, ikke vandudløbet.  Vandudløbsstikket er angivet med den grå indikator med en pil, der peger nedad.
Løs dette ved at trykke på Esc på skærmen. Frakobl hver forbundet slange i maskinenden, og tilslut dem derefter på den omvendte måde. Nu burde hankonnektoren til dræning være forbundet til den slange, der er sat i vandudløbet . Når det er gjort, skal du følge de tidligere trin en gang mere ud at tømme. Når vandet er tømt helt ud, kommer en meddelelse frem, der siger, at enheden nu er tom.		

4. SKYLLECYKLUS

BEMÆRK: Enheden **SKAL** skylles. Hvis enheden ikke skylles, kan der opstå skade på enhedens indvendige komponenter.

A.		Genopfyld enheden med 6 l sterilt vand eller 0,22 µm filtreret vand (ingen NaDCC).	
B.		Slut omledningsslangeenheden til de blå slanger, der stadig sidder forbundet til enheden, igen.	
C.			Sæt enheden tilbage i Normothermi-tilstand, mens temperatursimulatoren stadig er sat til 36,0 °C ±0,3. Lad vandet cirkulere i mindst 5 minutter , før du sætter enheden i standby-tilstand.
D.	Fjern omledningsslangeenheden fra det tilsluttede blå slangesæt. Dræn opløsningen fra enhedens vandbeholder i henhold til instruktionerne i tabel 2 . Genopfyld enheden med 6 l sterilt vand eller 0,22 µm filtreret vand med stuetemperatur, hvis den skal tages i brug igen , eller lad beholderen være tom, hvis enheden skal opbevares .		
E.	SLUK enheden, tag ledningen ud af stikkontakten, og frakobl de blå slanger. Frakobl og opbevar temperatursimulatoren (P/N 017-00245).		

ENHEDEN ER NU KLAR TIL OPBEVARING ELLER DEN NÆSTE PATIENT

BEMÆRK: Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele enhedens brugermanual. For komplet instruktioner i betjening, vedligeholdelse og rengøring henvises der til enhedens brugermanual.



TEKNISK SUPPORT

USA: 855.397.4547

VERDEN OVER: +1.978.663.0212

TECHSUPPORT@BELMONTMEDTECH.COM

WWW.BELMONTMEDTECH.COM