

INSTRUCTIONS DE DÉSINFECTION DU CIRCUIT D'EAU ALLON®

1. OUTILS REQUIS POUR LA DÉSINFECTION

	Kit de désinfection Allon® (P/N 405-00024) comprend :		
A.	Tube de dérivation à 2 connecteurs		P/N 200-00181
	Simulateur de température		P/N 017-00245
B.	EPI (équipement de protection individuelle) conformément aux instructions du fabricant des comprimés de NaDCC.		
C.			 Comprimés de dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à la concentration recommandée (comme indiqué dans le tableau 1)
D.	Lingettes désinfectantes médicales		
E.	Eau stérile/eau filtrée à 0,22 µm (environ 12 l au total) REMARQUE : Ne pas utiliser d'eau désionisée ou créée par osmose inverse, car cela pourrait favoriser la corrosion des composants métalliques du système.		

2. FRÉQUENCE DE DÉSINFECTION

Avant la première utilisation
Au moins une fois tous les 3 mois
Avant le stockage de longue durée (>3 mois)
Avant utilisation après un stockage prolongé (>3 mois)

REMARQUE : La désinfection peut être effectuée plus fréquemment si le protocole de l'hôpital l'exige.

REMARQUE : Si un patient, un clinicien ou une matière biologique entre en

Tableau 1

Comprimés nécessaires pour obtenir une concentration d'au moins 5382 ppm de NaDCC

PurTabs® (13,1 g)	Klorsept® 87 (17,4 g)	Aquatabs® (8,68 g)
8 comprimés pour 6 L d'eau	7 comprimés pour 6 L d'eau	7 comprimés pour 6 L d'eau

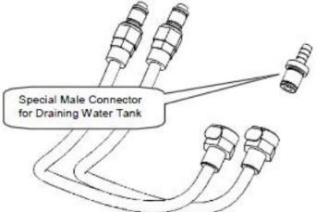
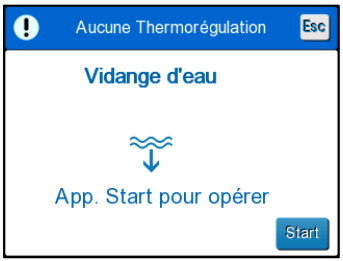
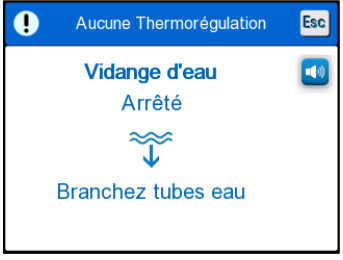
3. PRÉPARATION ET DÉSINFECTION DU DISPOSITIF

A.		S'assurer que le dispositif est en ARRÊT . Vérifier le niveau du réservoir d'eau. Si le niveau d'eau est inférieur à la ligne rouge inférieure, ajouter de l'eau stérile à température ambiante ou de l'eau filtrée à 0,22 µm jusqu'à ce que le niveau d'eau se situe entre les 2 flèches rouges afin de s'assurer que la machine dispose de 6 L. REMARQUE : Vous pouvez également préparer cette solution de désinfection dans un récipient séparé en suivant les instructions du fabricant des comprimés de NaDCC.
B.	EPI requis	Utiliser l'EPI approprié conformément aux instructions d'utilisation du fabricant des comprimés de NaDCC.

	Ajouter le NaDCC	Retirer le bouchon, la chaîne et l'anneau d'ancrage du réservoir d'eau du dispositif. Se procurer les comprimés de NaDCC appropriés et ajouter le nombre adéquat au réservoir d'eau du dispositif conformément au Tableau 1. REMARQUE : Ne pas désinfecter près de la zone de soins.
C.	15min   Laisser les comprimés se dissoudre pendant 15 minutes. Pendant que les comprimés se dissolvent, effectuer les étapes restantes de l'étape C. REMARQUE : Ne pas laisser la solution de comprimés dissous reposer dans le réservoir d'eau du dispositif pendant plus de 20 minutes.	
	2 connecteurs P/N 200-00181  Nettoyer le capuchon, la chaîne et l'anneau d'ancrage avec des lingettes désinfectantes médicales, puis remettre en place le capuchon, la chaîne et l'anneau d'ancrage. Connecter les tuyaux bleus (P/N 200-00109) à l'assemblage du tube de dérivation à 2 connecteurs (P/N 200-00181). Connecter les autres extrémités des tuyaux bleus au dispositif.	
	D. Brancher le dispositif, le mettre en MARCHE, et laisser l'autotest se terminer.	
E.	Normothermie  Sélectionner et faire fonctionner le dispositif en mode normothermie. Régler le point de consigne du patient à 37 °C.	
F.	 Brancher le simulateur de température (P/N 017-00245) dans la prise de température centrale située à l'avant du dispositif et le régler à 36,0 °C ±0,3 en tournant le cadran et en observant l'écran.	
G.	5-6min Laisser la solution circuler pendant 5 minutes (minimum) à 6 minutes (maximum) pour désinfecter circuit d'eau de l'appareil. Une fois l'opération terminée, mettre le dispositif en mode Attente.	
H.	Retirer l'assemblage du tube de dérivation du jeu de tuyaux bleus connecté. Vidanger la solution du réservoir d'eau du dispositif en suivant les instructions du Tableau 2. Éliminer la solution de nettoyage conformément au protocole de l'hôpital.	
I.	Cycle de rinçage	Passer à la Section 4 « Cycle de rinçage » pour terminer le processus de désinfection et de nettoyage.

Tableau 2

VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU

A.	SI UNE COMBINAISON EST CONNECTÉE : Dans une zone éloignée du service des soins aux patients, serrer fermement et déconnecter ensuite les tubes de raccordement d'eau de la combinaison lorsque le système est hors tension. Éliminer la combinaison.	
B.		Brancher un connecteur de vidange mâle à la « sortie d'eau » des tubes de raccordement d'eau et diriger le tube vers un sceau ou un évier pour recueillir l'eau. (voir l'image à l'étape E du <i>Tableau 2</i>) REMARQUE : Éliminer la solution de nettoyage conformément au protocole de l'hôpital. Mettre le système en Marche .
C.		Sélectionner Vide sur l'écran principal, ou accéder à Vide en appuyant sur l'icône Menu  , et en sélectionnant ensuite Services , et Vide .
D.		Appuyer sur OK . L'écran suivant s'affiche. Lorsque vous êtes prêt à commencer le processus, appuyez sur Start .
E.		Si le message d'erreur « Branchez tubes eau » apparaît, cela signifie que le connecteur de vidange mâle est connecté à l'entrée d'eau et non à la sortie d'eau.  La prise de sortie d'eau est indiquée par l'indicateur gris avec une flèche pointée vers le bas.
	Pour résoudre le problème, appuyer sur Esc sur l'écran. Déconnecter chaque tube d'eau à l'extrémité de la machine, puis le reconnecter dans le sens inverse. Le connecteur de vidange mâle doit maintenant être connecté au tube inséré dans la sortie d'eau . Une fois cette opération terminée, suivez à nouveau les étapes précédentes pour poursuivre la vidange. Une fois l'eau complètement vidée, un message apparaît indiquant que le dispositif est maintenant vide.	

4. CYCLE DE RINÇAGE

REMARQUE : Le dispositif **DOIT** être rincé. Si le dispositif n'est pas rincé, les composants internes du dispositif risquent d'être endommagés.

A.		Remplir le dispositif avec 6 litres d'eau stérile ou filtrée à 0,22 µm (sans NaDCC).	
B.		Reconnecter le tube de dérivation approprié aux tuyaux bleus encore connectés au dispositif.	
C.			Remettre le dispositif en mode normothermie avec le simulateur de température toujours réglé sur 36,0 °C ±0,3. Laisser l'eau circuler pendant au moins 5 minutes avant de mettre le dispositif en mode Attente.
D.	Retirer l'assemblage du tube de dérivation du jeu de tuyaux bleus connecté. Vidanger la solution du réservoir d'eau du dispositif en suivant les instructions du Tableau 2 . Remplir le dispositif avec 6 litres d'eau stérile à température ambiante ou d'eau filtrée à 0,22 µm si le dispositif est réutilisé ou laisser le réservoir vide s'il est stocké .		
E.	Mettre le dispositif en ARRÊT , le débrancher et déconnecter les tuyaux bleus. Déconnecter et ranger le simulateur de température (P/N 017-00245).		

LE DISPOSITIF EST PRÊT À ÊTRE STOCKÉ OU À ÊTRE UTILISÉ SUR LE PROCHAIN PATIENT

REMARQUE : Ce document ne remplace pas l'obligation de lire l'intégralité du manuel de l'utilisateur du dispositif. Pour des instructions complètes sur le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage, veuillez vous référer au manuel d'utilisateur du dispositif.



ASSISTANCE TECHNIQUE

ÉTATS-UNIS : 855.397.4547

RESTE DU MONDE : +1.978.663.0212

TECHSUPPORT@BELMONTMEDTECH.COM

WWW.BELMONTMEDTECH.COM