

ALLON® SU DEVRESİ DEZENFEKSİYON TALİMATLARI

1. DEZENFEKSİYON İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR				
A.	Allon® Dezenfeksiyon Kiti (P/N 405-00024) şunları içerir:			
	2 Konnektörlü Baypas Borusu	P/N 200-00181		
	Sıcaklık Simülatörü	P/N 017-00245		
B.	NaDCC (Sodyum Dikloroizosiyanürat) tablet üreticisinin talimatları uyarınca KKE (Kişisel Koruyucu Ekipman).			
C.				Önerilen konsantrasyonda NaDCC tabletleri (Tablo 1'de belirtildiği gibi)
D.	Hastane tipi dezenfektan mendil			
E.	Steril su / 0,22 µm filtrelenmiş su (toplam yaklaşık 12 litre) NOT: Sistemin metal bileşenlerinde aşınmaya yol açabileceği için deiyonize veya ters osmozla elde edilmiş su kullanmayın.			

2. DEZENFEKSİYON SIKLIĞI
İlk Kullanımdan Önce
En Az 3 Ayda Bir
Uzun Süreli Saklama Öncesinde (3 Aydan Uzun Süre)
Uzun Süreli Depolamadan Sonra (>3 Ay) Kullanmadan Önce

NOT: Hastane protokolü gerektiriyorsa dezenfeksiyon daha sık yapılabilir.

NOT: Bir hasta, sağlık personeli veya biyolojik materyal su devresiyle temas ederse derhal dezenfekte edin.

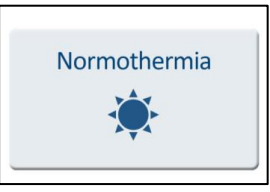
Tablo 1

En az 5382 ppm NaDCC konsantrasyonuna ulaşmak için gereken tabletler

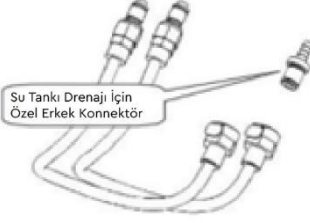
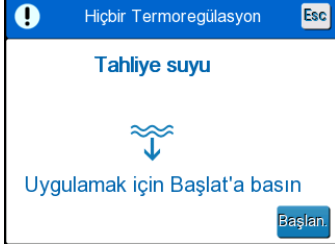
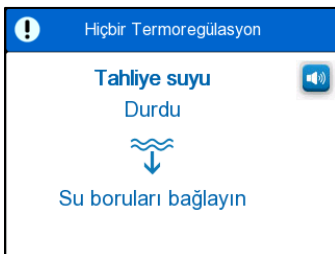
PurTabs® (13,1 g)	Klorsept® 87 (17,4 g)	Aquatabs® (8,68 g)
6 litre su başına 8 tablet	6 litre su başına 7 tablet	6 litre su başına 7 Tablet

3. CİHAZI HAZIRLAMA VE DEZENFEKSİYON

A.		Cihazın KAPALI olduğundan emin olun. Su tankındaki seviyeyi kontrol edin. Su seviyesi alt kırmızı çizginin altındaysa makinede 6 litre su olduğundan emin olmak için su seviyesi 2 kırmızı ok arasına gelene kadar oda sıcaklığında steril veya 0,22 µm filtrelenmiş su ekleyin. NOT: Alternatif olarak bu dezenfeksiyon solüsyonunu NaDCC tablet üreticisinin talimatları uyarınca ayrı bir kaptan da hazırlayabilirsiniz.
B.	KKE Zorunludur	NaDCC tablet üreticisinin kullanım talimatları uyarınca uygun KKE kullanın.
	NaDCC Ekleyin	Cihaz su tankının kapağını, zincirini ve ankraj halkasını çıkarın. Uygun NaDCC tabletlerini temin edin ve Tablo 1 e göre cihazın su tankına doğru sayıda tablet ekleyin. NOT: Bakım alanının yakınında dezenfekte etmeyin.

C.		 	15 dakika tabletlerin çözünmesini bekleyin. Tabletler çözünürken Adım C'deki kalan adımları uygulayın. NOT: Çözünen tablet solüsyonunu cihazın su tankında 20 dakikadan uzun süre bekletmeyin.
	2 Konnektörlü P/N 200-00181 	Kapağı, zinciri ve ankraj halkasını hastane tipi dezenfektan mendillerle silerek temizleyin. Ardından kapağı, zinciri ve ankraj halkasını geri takın.	
		Mavi hortumları (P/N 200-00109) 2 konnektörlü baypas borusu tertibatına (P/N 200-00181) takın. Mavi hortumların diğer uçlarını cihaza bağlayın.	
D.			Cihazı prize takın, AÇIK duruma getirin ve otomatik testin tamamlanmasını bekleyin.
E.			Normotermi modunu seçin ve cihazı çalıştırın. Hasta ayar noktasını 37 °C'ye ayarlayın.
F.			Sıcaklık simülatörünü (P/N 017-00245) cihazın ön tarafındaki ana sıcaklık soketine takın ve kadranı çevirip ekranı izleyerek 36,0 °C ±0,3 olacak şekilde ayarlayın.
G.			Cihazın su devresini dezenfekte etmek için solüsyonun 5 dakika (en az) ila 6 dakika (en çok) dolaşmasını bekleyin. İşlem tamamlandıktan sonra cihazı Bekleme moduna alın.
H.			Baypas borusu tertibatını, bağlı mavi hortum setinden çıkarın. Tablo 2'deki talimatları izleyerek cihazın su tankındaki solüsyonu boşaltın. Temizlik solüsyonunu hastane protokolüne uygun şekilde bertaraf edin.
I.	Yıkama Döngüsü		Dezenfeksiyon ve temizleme prosedürünü tamamlamak için "Yıkama Döngüsü" başlıklı 4. Bölüme geçin.

Tablo 2**SU TANKINI BOŞALTMA**

A.	BAĞLI SARGI VARSA: Hasta bakımının gerçekleştirildiği yerden uzak bir alanda, sistem kapalı durumdayken sargıyı sıkıca sabitleyin ve ardından bağlantı su borularından çıkarın. Sargıyı bertaraf edin.	
B.		Bağlantı su borularının " su çıkışı " tarafına erkek drenaj konnektörünü takın ve suyu toplamak için boruyu bir kovaya ya da lavaboya yönlendirin. (Tablo 2'deki E adımıyla yer alan resme bakın.) NOT: Temizlik solüsyonunu hastane protokolüne uygun şekilde bertaraf edin. Sistemi AÇIK duruma getirin.
C.		Ana ekranda " Boş su " seçeneğini belirleyin veya Menü simgesine dokunarak " Boş su " seçeneğine gidin, ardından sırasıyla " Servisler " ve " Boş su " seçeneklerini belirleyin.
D.		"OK" düğmesine basın. Aşağıdaki ekran açılacaktır. İşlemi başlatmaya hazır olduğunuzda " Başlan. " düğmesine basın.
E.		"Su boruları bağlayın" hata mesajının görünmesi, erkek drenaj konnektörünün Su Çıkışına değil, Su Girişine bağlandığı anlamına gelir.
		Su Çıkışı soketi, aşağıya bakan okun bulunduğu gri göstergeyle belirtilir.
Hatayı kapatmak için ekranda Esc düğmesine basın. Makine tarafındaki tüm bağlantı su borularını çıkarın, ardından diğer tarafa geri takın. Şimdi erkek drenaj konnektörü Su Çıkışına takılı boruya bağlı olacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra boşaltmaya devam etmek için önceki adımları bir kez daha uygulayın. Su tamamen boşaldığında cihazın boş olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir.		

4. YIKAMA DÖNGÜSÜ

NOT: Cihazın yıkanması **GEREKİR**. Cihaz yıkanmazsa cihazın dahili bileşenlerinde hasar meydana gelebilir.

A.		Cihazı 6 litre steril veya 0,22 µm filtrelenmiş suyla (NaDCC içermeyen) doldurun.
B.		Baypas borusu tertibatını cihaza hâlâ bağlı olan mavi hortumlara geri bağlayın.
C.		 Sıcaklık simülatörü yine 36,0 °C ±0,3 olacak şekilde ayarlanmış durumdayken cihazı tekrar Normotermi moduna alın. Cihazı Bekleme moduna almadan önce en az 5 dakika suyun dolaşmasını bekleyin.
D.	Baypas borusu tertibatını, bağlı mavi hortum setinden çıkarın. Tablo 2 'deki talimatları izleyerek cihazın su tankındaki solüsyonu boşaltın. Cihazı tekrar kullanacaksanız oda sıcaklığında 6 litre steril veya 0,22 µm filtrelenmiş suyla doldurun. Cihazı depolamaya alacaksanız tankı boş bırakın.	
E.	Cihazı KAPALI duruma getirin, prizden çıkarın ve mavi hortumları cihazdan ayırın. Sıcaklık simülatörünü (P/N 017-00245) çıkartın ve depolamaya alın .	

CİHAZ ARTIK DEPOLANMAYA VEYA BİR SONRAKİ HASTADA KULLANILMAYA HAZIRDIR

NOT: Bu belge, cihaz kullanım kılavuzunun tamamını okuma gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Cihazla ilgili tüm kullanım, bakım ve temizleme talimatları için lütfen kullanım kılavuzunu inceleyin.