

## FONCTIONNEMENT PAS À PAS DU DISPOSITIF ALLON® : Mode normothermie (par défaut)

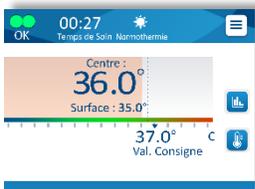
**Indication d'utilisation :** Maintenir la température corporelle prédéfinie par le médecin. Maintenir une température corporelle normale pendant les interventions chirurgicales chez les patients adultes et pédiatriques.

### 1. CONFIGURATION

- Placer l'unité Allon à l'endroit souhaité et bloquer les roues avant.
- Remplir le réservoir d'eau de sorte que le niveau se trouve entre les deux lignes rouges. Utiliser exclusivement **de l'eau du robinet stérile ou filtrée à 0,22 micron.**
- Placer la ThermoWrap® appropriée sur la table d'opération (*Consulter le mode d'emploi de la ThermoWrap*)
- Connecter les tubes à eau à la ThermoWrap et au dispositif Allon en veillant à entendre le clic lors de la connexion de chaque tube. S'assurer que les pinces de la ThermoWrap sont ouvertes.
- Mettre le dispositif Allon sous tension. L'unité réalise un autotest complet.
- L'eau est automatiquement préchauffée après l'autotest.
- Une fois le préchauffage terminé, le système commence à alimenter automatiquement la ThermoWrap en eau chaude.
-  Il est possible de sélectionner la température de consigne (température de consigne par défaut = 37,0 °C en mode normothermie) ou de sélectionner la température de sortie d'eau en mode manuel (valeur par défaut = 38,5 °C) à l'aide de la touche Température de consigne.
- S'assurer que les alarmes du dispositif sont sous tension (**ON**). Si le message « Arrêt de toutes alarmes capteurs temp. », s'affiche en bas de l'écran, suivez les étapes suivantes pour réactiver les alarmes. Allez à **MENU**, sélectionnez **Configuration**, saisissez le mot de passe **6873**, sélectionnez « Alarmes capteurs temp. » **ON**, appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.




### 2. CHAUFFAGE

- Placer le patient sur la ThermoWrap (une fois la combinaison remplie d'eau). Consulter le mode d'emploi de la ThermoWrap.
- Connecter le câble **Core** à la prise **Core** à droite et le câble **Surface** à la prise **Surface** à gauche du système, en appariant les couleurs, gris sur gris et vert sur vert, puis brancher les sondes de température aux câbles adaptateurs.
- Insérer la sonde **Centre** dans le patient et fixer la sonde **Surface** sur la peau du patient.
- Fixer la ThermoWrap sur le patient.
- En mode normothermie, la température du patient est désormais régulée par Allon en fonction des paramètres définis par le médecin.
  - En mode manuel, la température de l'eau est désormais régulée par Allon en fonction des paramètres définis par le médecin.


\*Ce document ne se substitue pas à l'obligation de lire tout le manuel de l'utilisateur Allon.

## 3. REFROIDISSEMENT

1. Lors du refroidissement du patient, commuter l'unité Allon en mode veille
2. Sélectionner **VEILLE** dans le menu et maintenir ce mode actif tant que le médecin ne souhaite pas que la machine chauffe.
3. Pour redémarrer le chauffage avec Allon, sélectionner **FONCTIONNEMENT** dans le menu



## 4. DÉCONNEXION

1. Passer en mode veille et attendre quelques secondes
2. Bien serrer les connecteur sur la ThermoWrap, sortir le patient de la combinaison, puis retirer les ondes du patient
3. Déconnecter la ThermoWrap de l'unité Allon
4. Éliminer la ThermoWrap et les sondes jetables

## 5. APRÈS L'UTILISATION : CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

1. Verser du dichloroisocyanurate (DCCNa) sous forme de tablettes ou de poudre dans le réservoir d'eau en respectant les recommandations du fabricant du DCCNa et faire fonctionner pendant 30 minutes en mode Veille.
2. Vider le réservoir d'eau : Sélectionner **Vider** dans le menu Fonctions programmées (voir les instructions du Manuel de l'utilisateur). Allon vous alertera lorsque le réservoir sera vide.
  - **Pour un usage fréquent (3 à 4 fois par semaine)** : Une fois par semaine, vidanger l'eau et rincer avec de l'eau stérile ou filtrée à 0,22 micron.
  - **Pour un usage peu fréquent** : Après chaque utilisation, vidanger l'eau et rincer avec de l'eau stérile ou filtrée à 0,22 micron.
3. Nettoyer et désinfecter la machine conformément au protocole de l'établissement. Utilisez des lingettes de désinfection standard pour désinfecter les surfaces externes du système Allon, y compris tous les câbles de température, les raccords d'eau et les connecteurs, ainsi que le capuchon, la chaîne et l'anneau d'ancrage.



## 4. LE SAVIEZ-VOUS ?

1. L'utilisation de la ThermoWrap **NE SE SUBSTITUE PAS** aux directives de pratique courante pour la prévention des escarres. Poursuivre l'application des mesures standard de prévention des escarres lors de l'utilisation de la ThermoWrap.
2. **NE PAS** utiliser la ThermoWrap comme outil de levage ou de déplacement du patient.
3. Éviter toute accumulation de liquides entre la peau et la ThermoWrap.