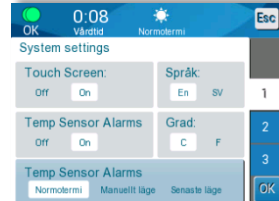


STEGVISA ANVISNINGAR FÖR ALLON®: Normotermiläge (standard)

Indikation för användning: Upprätthåll förinställd kroppstemperatur som har fastställts av läkaren. Upprätthåll normala kroppstemperaturer under kirurgiska ingrepp på vuxna och pediatrika patienter.

1. INSTÄLLNING

- Ställ Allon-enheten på önskad plats och lås framhjulen.
- Fyll vattentanken så att nivån ligger mellan de två röda strecken med endast **sterilt vatten eller kranvatten som har filtrerats med ett filter som har en porstorlek på 0,22 mikron**.
- Placera ett lämpligt ThermoWrap® på operationsbordet (*Se bruksanvisningen för ThermoWrap*)
- Anslut vattenslangarna till ThermoWrap och till Allon-enheten och lyssna efter ett klickljud när varje slang ansluts. Säkerställ att klämmorna på ThermoWrap är öppna.
- Slå **PÅ** Allon-enheten. Ett fullständigt självtest utförs.
- Föruppvärmning av vattnet görs automatiskt efter självtestet.
- När självtestet är klart börjar varmt vatten automatiskt strömma från systemet till ThermoWrap.
-  Du kan välja börvärdestemperaturen (standardbörvärde = 37,0 °C i Normotermiläge) eller välja temperatur för vattenutflöde i Manuellt läge (standard = 38,5 °C) med hjälp av inställningsnyckeln.
- Se till att enhetens larm är **PÅ**. Om det finns meddelande längst ner på skärmen som anger "Larm **AV** för alla temp sensorer", följ dessa steg för att slå på larm igen. Gå till **MENY**, välj **INSTÄLLNINGAR**, ange lösenordet **6873**, välj "Temp Sensor Alarms" **PÅ** och tryck på **OK** för att bekräfta.

2. UPPVÄRMNING

- Lägg patienten på ThermoWrap (när filten har fyllts med vatten). Se bruksanvisningen för ThermoWrap.
 - Anslut **Kärn-kabeln** till **Core-uttaget** på höger sida och **Yt-kabeln** till **Surface-uttaget** på vänster sida av systemet genom att matcha färgerna (grå mot grå, grön mot grön) och sedan ansluta temperatursonderna till de avsedda adapterkablarna.
 - För in **kärnsonden** i patienten och fäst **ytsonden** på patientens hud.
 - Säkra ThermoWrap på patienten.
 - I Normotermiläge regleras patientens temperatur nu av Allon enligt läkarens inställningar.
 - I Manuellt läge regleras vattentemperaturen nu av Allon enligt läkarens inställningar.
- 
- 

*Detta dokument ersätter inte kravet att läsa hela bruksanvisningen för Allon.

3. KYLNING

1. Allon ska försättas i standbyläge när patienten kyles ned
2. Välj **STANDBY** från menyn och fortsätt att använda detta läge tills läkaren vill att maskinen värms upp.
3. Återuppta uppvärmning med Allon genom att välja **ANVÄND** från menyn



4. FRÅNKOPPLA

1. Byt till standbyläge och vänta i några sekunder
2. Kläm fast anslutningarna ordentligt på ThermoWrap, linda upp patienten och avlägsna sondaerna från patienten
3. Koppla bort ThermoWrap från Allon
4. Kassera ThermoWrap och engångssonderna

5. HANTERING EFTER ANVÄNDNING: RIKTLINJER FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION

1. Lägg natrium sodium dikloroisocyanurat (NaDCC) i tablett- eller pulverform i vattentanken enligt rekommendationerna från NaDCC-tillverkaren och kör i 30 minuter i standbyläge.
2. Töm vattentanken: Välj **Töm** från Service-menyn (se bruksanvisningen för instruktioner). Allon meddelar när tanken har tömts.
 - **Om enheten används ofta (3-4 gånger i veckan):** Töm vattnet en gång i veckan och skölj med sterilt vatten eller vatten som filtrerats genom 0,22 mikron.
 - **Om enheten används sällan:** Töm vattnet efter varje användning och skölj med sterilt vatten eller vatten som filtrerats genom 0,22 mikron.
3. Rengör och desinficera maskinen och tillbehören enligt sjukhusets protokoll. Använd desinfektionsservetter av standardtyp för att desinficera externa ytor på Allon-systemet, inklusive alla temperaturkablar, vattenanslutningar och kopplingar, samt locket, kedjan och ankarringen.



4. VISSTE DU?

1. Användning av ThermoWrap ersätter **INTE** riktlinjer för god praxis som ska följas för att förhindra trycksår. Fortsätt att använda standardåtgärder för att förebygga trycksår när du använder ThermoWrap.
2. En ThermoWrap ska **INTE** användas som ett verktyg för att lyfta eller flytta patienten.
3. Se till att vätskor inte ansamlas mellan huden och ThermoWrap.