

ALLON®-VEJLEDNING TRIN-FOR-TRIN: Normotermi-tilstand (standardindstilling)



Indikation for brug: Oprethold forudindstillet kropstemperatur som bestemt af lægen. Oprethold normale kropstemperaturer under kirurgiske procedurer hos voksne og pædiatriske patienter.

1. OPSÆTNING

1. Anbring Allon-enheden på den ønskede placering, og lås de forreste hjul.
2. Fyld vandtanken så niveauet er mellem de to røde linjer, anvend kun **sterilt eller 0,22 mikron filtreret vand fra hanen**.
3. Anbring den passende ThermoWrap® på operationsbordet (*Se brugsvejledningen til ThermoWrap*).
4. Slut vandslangerne til ThermoWrap og til Allon-enheden, og lyt efter en kliklyd der opstår, når hver slange tilsluttes. Sørg for, at klemmerne på ThermoWrap er åbne.
5. **TÆND** for Allon-enheden. En komplet selvtest udføres.
6. Forvarmning af vandet udføres automatisk efter selvtesten.
7. Når dette er afsluttet, begynder systemet automatisk at tilføre varmt vand til ThermoWrap.
8.  Du kan vælge sætpunkttemperaturen (standard-sætpunkt = 37,0 °C i normotermi-tilstand) eller vælge vandudløbstemperaturen i manuel tilstand (standard = 38,5 °C) ved hjælp af Sætpunkt-tasten.

2. OPVARMNING

1. Anbring patienten på ThermoWrap (efter omslaget er fyldt med vand). Se brugsanvisningen til ThermoWrap.
2. Slut **kerne**-kablet til **core**-stikkontakten på højre side og **overflade**-kablet til **surface**-stikkontakten på venstre side af systemet, således at farverne matcher, grå til grå og grøn til grøn, og sæt derefter temperatursonderne i de tilsvarende adapterkabler.
3. Indfør **kerne**-sonden i patienten, og fastgør **overflade**-sonden på patientens hud.
4. Sikr ThermoWrap på patienten.
5.
 - I normotermi-tilstand reguleres patientens temperatur nu af Allon, som indstillet af lægen.
 - I manuel tilstand reguleres vandtemperaturen nu af Allon, som indstillet af lægen.

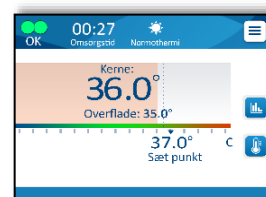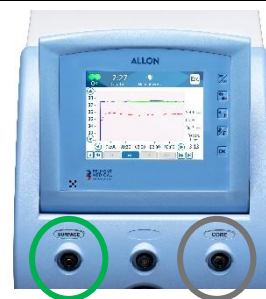

*Dette dokument erstatter ikke kravet om at læse hele brugermanualen til Allon.

3. AFKØLING

1. Når patienten afkøles, skal Allon sættes i standby-tilstand.
2. Vælg **STANDBY** fra menuen, og behold denne tilstand, indtil klinikerens ønsker, at maskinen skal varme.
3. For at forsætte opvarmning med Allon, vælg **BETJEN** fra menuen.



4. FRAKOBLING

1. Skift til standby-tilstand og vent et par minutter.
2. Klem tilslutningerne på ThermoWrap tæt sammen, og pak patienten ud og fjern sonderne fra patienten.
3. Afkobl ThermoWrap fra Allon.
4. Kassér ThermoWrap og engangssonder.

5. BEHANDLING OG VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG

1. Se oplysninger om rengøring og desinfektion af udvendige overflader, hætte og kæde i kapitel 6 i Allon-brugermanualen (DDT-063-000).
2. Se kapitel 6 i Allon-brugermanualen (DDT-063-000) eller Allon-instruktioner til desinfektion af vandkredsløb (701-00744) for oplysninger om desinfektion af vandkredsløbet.

6. VIDSTE DU?

1. Brug af ThermoWrap erstatter **IKKE** almene retningslinjer for forhindring af tryksår. Fortsæt med at tage almene foranstaltninger til forebyggelse af tryksår, når du bruger ThermoWrap.
2. ThermoWrap må **IKKE** bruges som et værktøj til at løfte eller flytte patienten.
3. Undgå ophobning af væske mellem huden og ThermoWrap.

