

ALLON® - FUNZIONAMENTO DETTAGLIATO: modalità di normotermia (predefinita)



Indicazione d'uso: mantenere una temperatura corporea predefinita secondo quanto stabilito dal medico. Mantenere le temperature corporee normali durante le procedure chirurgiche in pazienti adulti e pediatrici.

1. CONFIGURAZIONE:

1. Posizionare l'unità Allon nell'area d'interesse e bloccare le rotelle anteriori.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua in modo che il livello si trovi tra le due linee rosse utilizzando solo **acqua sterile o di rubinetto filtrata a 0,22 micron.**
3. Posizionare la fascia ThermoWrap® appropriata sul tavolo operatorio (*Vedere le istruzioni per l'uso della fascia ThermoWrap*).
4. Collegare i tubi dell'acqua alla fascia ThermoWrap e al dispositivo Allon, e verificare che venga emesso un clic quando ciascun tubo viene collegato. Assicurarsi che i morsetti posti sulla fascia ThermoWrap siano aperti.
5. Mettere il dispositivo Allon su **ON**. Viene eseguito un autotest completo.
6. Dopo l'autotest viene eseguito automaticamente il preriscaldamento dell'acqua.
7. Al termine, il sistema inizia automaticamente a far scorrere l'acqua calda verso la fascia ThermoWrap.
8.  È possibile selezionare la temperatura nominale (temperatura nominale predefinita = 37,0 °C in modalità di normotermia) o selezionare la temperatura di uscita dell'acqua nella modalità manuale (temperatura predefinita = 38,5 °C) utilizzando il tasto Temperatura nominale.

2. RISCALDAMENTO

1. Posizionare il paziente sulla fascia ThermoWrap (dopo che si è riempita di acqua). Vedere le istruzioni per l'uso della fascia ThermoWrap.
2. Collegare il cavo **Nucleo** alla presa **Core** a destra e il cavo **Area** alla presa **Surface** a sinistra del sistema facendo corrispondere i colori, il grigio con il grigio e il verde con il verde, quindi inserire le sonde di temperatura nei corrispondenti cavi adattatori.
3. Inserire la sonda **Nucleo** nel paziente e collegare la sonda **Area** alla cute del paziente.
4. Fissare la fascia ThermoWrap sul paziente.
5.
 - In modalità di normotermia, la temperatura del paziente è ora regolata dal dispositivo Allon come stabilito dal medico.
 - In modalità manuale, la temperatura dell'acqua è regolata dal dispositivo Allon come stabilito dal medico.

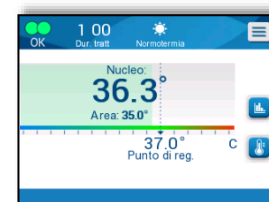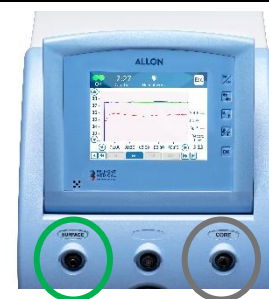

*La lettura del presente documento non sostituisce il requisito di lettura dell'intero Manuale d'uso Allon.

3. RAFFREDDAMENTO

1.	Quando si raffredda il paziente, il dispositivo Allon deve essere impostato nella modalità Standby.	
2.	Selezionare STANDBY dal menu e mantenere questa modalità fino a quando il medico desidera far riscaldare il dispositivo.	
3.	Per riprendere il riscaldamento con il dispositivo Allon, selezionare AZIONA dal menu.	

4. DISCONNESSIONE

1.	Passare alla modalità Standby e attendere alcuni minuti.
2.	Chiudere bene i morsetti dei connettori sulla fascia ThermoWrap, togliere la fascia dal paziente e rimuovere le sonde dal paziente.
3.	Scollegare la fascia ThermoWrap dal dispositivo Allon.
4.	Gettare via la fascia ThermoWrap e le sonde monouso.

5. CURA E MANUTENZIONE DOPO L'USO

1.	Per la pulizia e la disinfezione delle superfici esterne, del tappo e della catenella, fare riferimento al Capitolo 6 del Manuale d'uso di Allon (DDT-063-000).
2.	Per le istruzioni di disinfezione del circuito idrico, fare riferimento al Capitolo 6 del Manuale d'uso di Allon (DDT-063-000) o alle istruzioni di disinfezione del circuito idrico di Allon (701-00744).

6. LO SAPEVATE CHE...

1.	L'uso della fascia ThermoWrap NON sostituisce le linee guida di prassi comune per prevenire le lesioni da pressione. Continuare a utilizzare misure preventive standard per le lesioni da pressione quando si utilizza la fascia ThermoWrap.
2.	La fascia ThermoWrap NON deve essere utilizzata come strumento per sollevare o spostare il paziente.
3.	Evitare l'accumulo di fluidi tra la cute e la fascia ThermoWrap.

