

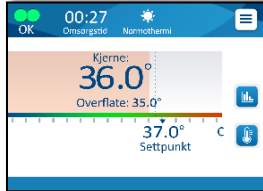
ALLON® TRINN FOR TRINN: Normotermi-modus (standard)

Indikasjon for bruk: Opprettholde en forhåndsinnstilt kroppstemperatur fastsatt av legen. Opprettholde normale kroppstemperaturer under kirurgiske prosedyrer hos voksne og pediatriske pasienter.

1. OPPSETT

1.	Plasser Allon-anordningen på ønsket sted og lås forhjulene.
2.	Fyll vanntanken slik at nivået er mellom de to røde strekene. Bruk kun sterilt eller 0,22 mikroners filtrert springvann .
3.	Plasser egnet ThermoWrap® på operasjonsbordet (<i>se bruksanvisningen for ThermoWrap</i>).
4.	Koble vannslangene til ThermoWrap og til Allon-anordningen. Det høres et klikk når hver slange kobles til. Sørg for at klemmene på ThermoWrap® er åpne.
5.	Slå PÅ Allon-anordningen. Det utføres en fullstendig selvtest.
6.	Forvarming av vannet utføres automatisk etter selvtesten.
7.	Når forvarmingen er ferdig, begynner systemet automatisk å strøme varmt vann til ThermoWrap.
8.	 Du kan velge settpunkttemperaturen (standard settpunkt = 37,0 °C i normotermi-modus) eller velge vann ut-temperaturen i manuell modus (standard = 38,5 °C) med settpunktknappen.

2. OPPVARMING

1.	Plasser pasienten på ThermoWrap (etter at omslaget er fylt med vann). Se bruksanvisningen for ThermoWrap.	
2.	Koble kjerne -kabelen til core -kontakten på høyre side og overflate -kabelen til surface -kontakten på venstre side av systemet ved å matche farger, grå til grå og grønn til grønn, og plugg deretter temperaturprobene i riktige adapterkabler.	
3.	Før kjerne -proben inn i pasienten og fest overflate -proben på pasientens hud.	
4.	Fest ThermoWrap på pasienten.	
5.	<ul style="list-style-type: none"> I normotermi-modus reguleres nå pasientens temperatur av Allon som innstilt av legen. I manuell modus reguleres nå vanntemperaturen av Allon som innstilt av legen. 	

*Dette dokumentet erstatter ikke kravet om å lese hele brukerhåndboken til Allon.

3. KJØLING

1. Ved kjøling av pasienten skal Allon settes i standby-modus.
2. Velg **STANDBY** fra menyen og behold denne modusen til legen ønsker at maskinen skal varme.
3. For å gjenoppta oppvarming med Allon velger du **BRUK** fra menyen.



4. FRAKOBLING

1. Bytt til standby-modus og vent noen minutter
2. Klem koblingene stramt på ThermoWrap og avdekk pasienten og fjern probene fra pasienten.
3. Koble ThermoWrap fra Allon.
4. Kast ThermoWrap og prober til engangsbruk.

5. ETTERBRUK PLEIE OG VEDLIKEHOLD

1. For rengjøring og desinfisering av utvendige overflater, hette, kjede, se kapittel 6 i brukerhåndboken for Allon (DDT-063-000).
2. For instruksjoner for desinfisering av vannkretsen, se kapittel 6 i brukerhåndboken for Allon (DDT-063-000) eller instruksjoner for desinfisering av vannkrets for Allon (701-00744).

6. VISSTE DU AT?

1. Bruk av ThermoWrap erstatter **IKKE** retningslinjer for vanlig praksis for å hindre trykksår. Fortsett å bruke standard forebyggende tiltak for å hindre trykksår når du bruker ThermoWrap.
2. ThermoWrap skal **IKKE** brukes som et middel til å løfte eller flytte pasienten.
3. Unngå væskeansamling mellom huden og ThermoWrap.

