

## ALLON® ADIM ADIM ÇALIŞTIRMA: Normotermi Modu (Varsayılan)


**Kullanım endikasyonu:** Hekimin belirlediği önceden ayarlanmış vücut sıcaklığını idame ettirmek. Yetişkin ve pediyatrik hastalarda cerrahi işlemler sırasında normal vücut sıcaklıklarını idame ettirmek.

### 1. KURULUM

- Allon üniteyi istenen konuma yerleştirin ve ön tekerlekleri kilitleyin.
- Su deposunu iki kırmızı çizginin arasındaki seviyeye kadar yalnızca **steril su veya 0,22 mikron filtrelenmiş çeşme suyuyla** doldurun.
- Uygun ThermoWrap®'i ameliyat masasına koyun (*ThermoWrap'in Kullanım Talimatları'na* bakın).
- Su hortumlarını her bir hortum bağlandığında klik sesini duyarak ThermoWrap'e ve Allon cihaza bağlayın. ThermoWrap'teki tüm klemplerin açık olduğundan emin olun.
- Allon cihazı **AÇIN**. Tam otomatik test gerçekleştirilir.
- Su ön ısıtma, otomatik testten sonra otomatik olarak gerçekleştirilir.
- Tamamlandıktan sonra sistem, otomatik olarak ThermoWrap'e sıcak su akışını başlatır.
-  Set noktası düğmesiyle set noktası sıcaklığını (Normotermi modunda varsayılan set noktası = 37,0 °C) veya Manuel modunda su çıkış sıcaklığını (varsayılan = 38,5 °C) seçebilirsiniz.

### 2. ISITMA

- Hastayı ThermoWrap'in üstüne konumlandırın (sargı suyla dolduktan sonra). ThermoWrap'in kullanma talimatına bakın.
- Gri-gri ve yeşil-yeşil olacak şekilde renkleri eşleştirerek **İç Isı** kablosunu sistemin sağındaki **Core** soketine ve **Yüzey** kablosunu sistemin solundaki **Surface** soketine bağlayın ve ardından sıcaklık problemlerini uygun adaptör kablolarına takın.
- İç** probunu hastanın içine ve **Yüzey** probunu hastanın cildine takın.
- ThermoWrap'i hastanın üstüne sabitleyin.
- Normotermi modunda hastanın sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.
  - Manuel modunda suyun sıcaklığını artık hekimin ayarına göre Allon regüle eder.

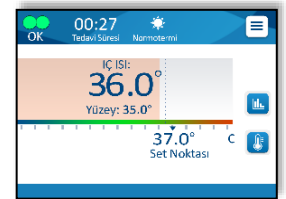

\*Bu belge, Allon'un kullanım kılavuzunun tamamını okuma gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

## 3. SOĞUTMA

1. Hasta soğutulurken Allon, Bekleme moduna geçirilmelidir.
2. Menüden **BEKLEME** ögesini seçin ve klinisyen makinenin ısıtmasını isteyene kadar bu modda kalın.
3. Allon'la ısıtmaya devam etmek için menüden **ÇALIŞTIR** ögesini seçin.



## 4. AYIRMA

1. Bekleme moduna geçin ve birkaç dakika bekleyin.
2. Konnektörleri ThermoWrap'e sıkıca klempleyin, hastanın sargısını açın ve problemleri hastadan çıkarın.
3. ThermoWrap'i Allon'dan ayırın.
4. ThermoWrap'i ve tek kullanımlık problemleri atın.

## 5. KULLANIM SONRASI BAKIM VE MUHAFAZA

1. Dış yüzeylerin, kapağın ve zincirin temizliği ve dezenfeksiyonu için lütfen Allon Kullanım Kılavuzu'nun (DDT-063-000) 6. Bölümüne bakın.
2. Su devresinin dezenfeksiyonuna ilişkin talimatlar için lütfen Allon Kullanım Kılavuzu'nun (DDT-063-000) 6. Bölümüne veya Allon Su Devresi Dezenfeksiyon Talimatları'na (701-00744) bakın.

## 6. BİLİYOR MUYDUNUZ?

1. ThermoWrap kullanımı, bası yaralarını önlemeye yönelik yaygın pratik kılavuzlarının **YERİNE GEÇMEZ**. ThermoWrap'i kullanırken standart bası yarası önleme tedbirlerini uygulamaya devam edin.
2. ThermoWrap, hastayı kaldırmaya veya hareket ettirmeye yönelik bir araç olarak **KULLANILMAMALIDIR**.
3. Cilt ve ThermoWrap arasında sıvı birikmesinden kaçının.

