



THE BELMONT[®] RAPID INFUSER RI-2

버튼 터치로, 인명을 구하는 가온된 혈액과
유체를 신속하고, 안정적이며, 거품이 없고,
100% 알루미늄 무함유인 상태로 전달.

함께 인명을 구함.





군사



수술실



분만 및 소아과



응급 및 중환자 치료


“THE BELMONT”는 신뢰를 제공합니다

20년 이상 가장 극한의 상황에서 사용되고 있는, The Belmont® 급속 주입기는 고유량 성능*과 수혈 합병증을 줄이기 위해 설계된 포괄적인 안전 기능을 갖춘 **100% 알루미늄 무함유 유체 전달 기능을 제공하는 유일한 급속 주입기**로 전 세계 임상의들의 신뢰를 얻었습니다. 최악의 상황에 대해 최고의 장비로 대비함으로써 마음의 평화를 누리십시오.

거품이 없음. 신뢰할 수 있음. 빠름.



- 1 환기/재순환 라인
- 2 입력 공기 감지기
- 3 고속 연동 펌프
- 4 입력 온도 프로브
- 5 열 교환기
- 6 출력 온도 프로브
- 7 터치스크린 디스플레이
- 8 압력 센서/디버블러
- 9 출력 공기 감지기
- 10 주입/재순환 밸브

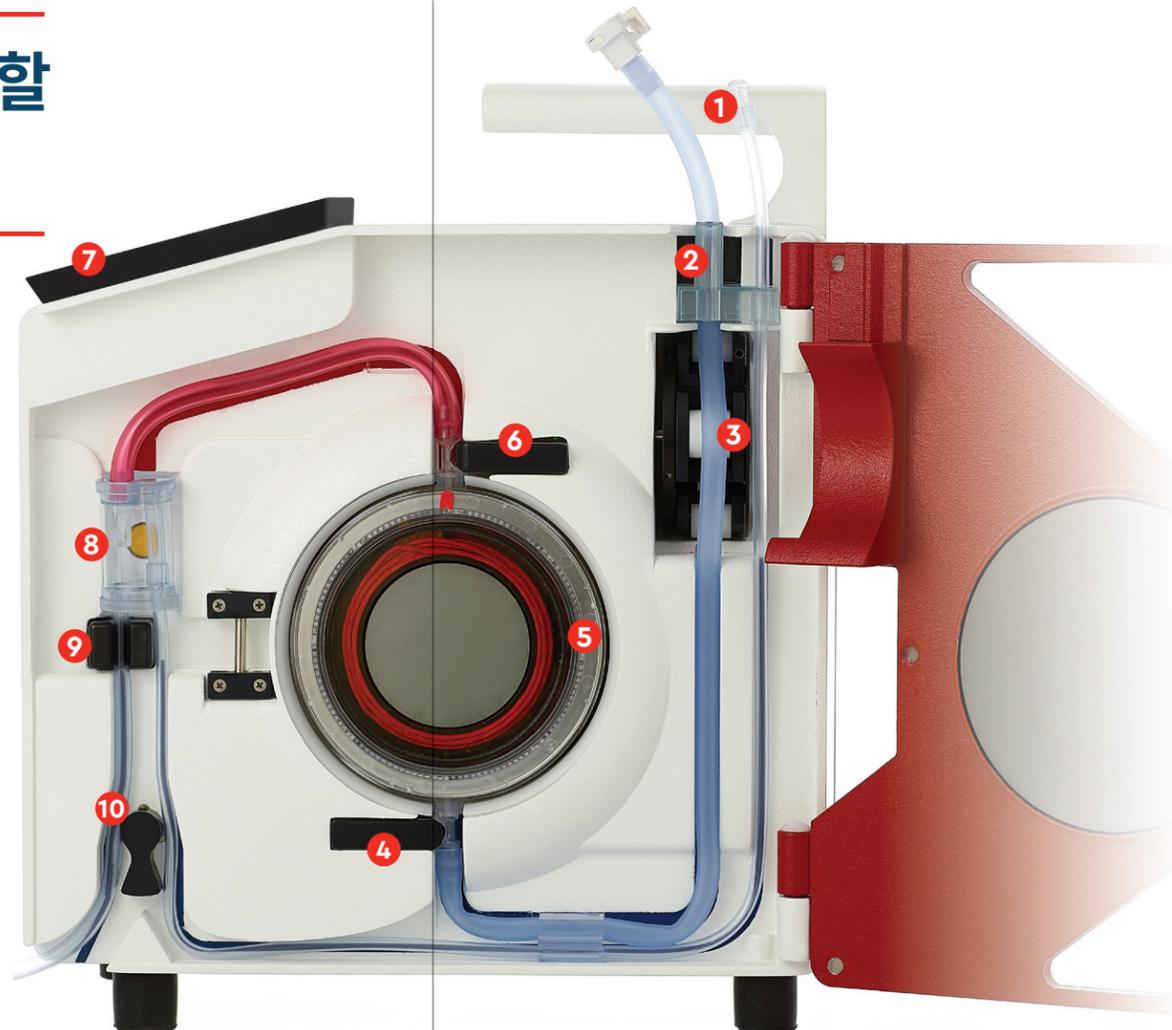

100% 알루미늄 무함유 일회용품

의료용 스테인리스 스틸 열교환기는 알루미늄 노출 위험을 제거합니다.

자동 공기 감지 및 제거

2개의 초음파 공기 감지기와 환자 안전 밸브가 공기 색전증으로부터 안전하게 보호합니다.

자동 프라이밍

1분 이내에 완전히 프라이밍하고 환자의 연결을 끊지 않고 쉽게 다시 프라이밍합니다.

고속 연동 펌프

2.5 ~ 1000ml/min* 범위의 유속으로 유체 전달을 정밀하게 제어합니다.

전자기 유도 가열

건식 유도 가열 기술과 2개의 적외선 온도 센서가 수 초 이내에 일정한 정상 온도 유체를 제공합니다.

고급 압력 조절


압력이 300mmHg를 초과할 때 자동 압력 모니터링 및 유속 조정.

직관적인 터치스크린 디스플레이

고대비 디스플레이는 따라하기 쉬운 화면 지침, 알람 및 경고에 대한 명확한 설명, 장치 작동에 대한 빠른 액세스를 제공합니다.

실시간 표시:

- 설정 속도
- 실제 속도
- 총 주입량
- 라인 압력

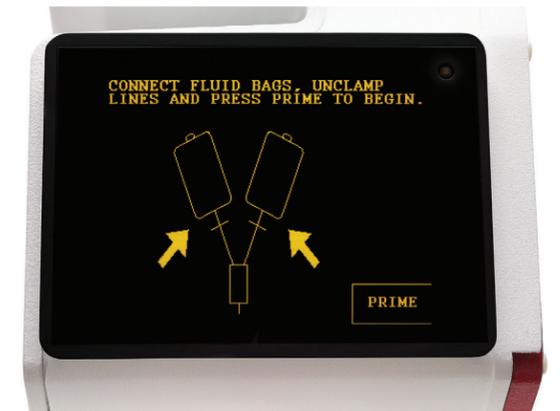

주문 정보

급속 주입기 RI-2, 1000ml/min

주입 속도: 2.5-1000ml/min

- 미국: 부품 #903-00037(120V)
- 국제: 부품 #903-00037A(230V)

급속 주입기 RI-2, 750ml/min

주입 속도: 2.5-750ml/min

- 미국: 부품 #903-00039(120V)
- 국제: 부품 #903-00039A(230V)
- NSN: 6515-01-661-8500(120V)

3-스파이크 일회용 세트

부품 #903-00006(12세트/케이스)

부품 #903-00106(6세트/케이스)

3.0리터 물통(LVR)

부품 #903-00018

4X4 LVR 및 열교환기 세트

부품 #903-00032

환자 라인 연장부

부품 #903-00022

이중 환자 라인

부품 #903-00004



표준

120ml 물통(3-스파이크)

옵션

3.0리터 물통(5-스파이크)

하드웨어 사양

치수

13.5in. x 7.5in. x 12in.

342.9mm. x 190.5mm. x 304.8mm.

중량

28lb.

12.7kg.

휴대성

장치 상단의 퀵온 IV 폴 마운트/핸들

전원

115볼트 또는 220/240볼트 AC 입력

배터리

내장형, 운송용 충전식

가열 없이 모든 기능 작동

유체 펌프

롤러식 연동 펌프

유속 2.5-1000ml/min

히터

최대 인가 전력, 1440와트

적용 부품 유형

유형 CF

제세동 방지

센서

공기 감지기 2개, 압력 변환기, 온도 프로브 2개(적외선 감지), 펌프 주입 속도 센서, 도어 열림 감지기 및 밸브 활성화 센서

제어 컴퓨터

내장형, 모든 기능 제어

컴퓨터 장애 시 예비 하드웨어 오버라이드 보호

디스플레이

방수 터치 패드가 있는 LCD 유형

• 외부 치수

5.85in. x 4.12in.

148.1mm. x 104.7mm.

• 활성 영역

4.53in. x 3.40in.

115.1mm. x 86.3mm.

모든 일회용품은 100% 알루미늄 무함유임

당사가 제공하는 제품에 대한 자세한 정보는
sales@belmontmedtech.com으로 문의하십시오.



환자 가온



환자 냉각



유체 관리



780 BOSTON ROAD
BILLERICA, MA 01821, USA

미국: 866.663.0212

전 세계: +1 978.663.0212

팩스: 978.663.0214

WWW.BELMONTMEDTECH.COM



The Belmont® 급속 주입기 RI-2는 관련 표준에 따라 감전, 화재 및 기계적 위험에 대해 평가되었습니다.

ISO 13485 등록 Belmont Instrument LLC 파일 번호: A18173

Belmont Medical Technologies™는 Belmont Instrument, LLC의 상표입니다
© Belmont Instrument, LLC | 701-00136-KO Rev. A